




## Förenklad instruktion för start av hemlånelampa

### Innan du startar lampan första gången:

- Anslut nätsladden till ett jordat uttag
- Sätt in nyckeln och vrid från läge 0 till 1
- Enheten är nu klar för användning

### Inställning av behandlingsdos

- När ljusarmaturen är påslagen visas i kontrolldisplayen denna bild:

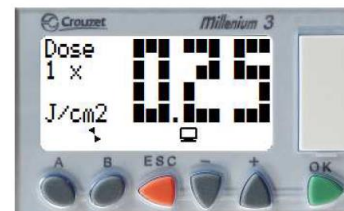

- **Du kan med knapparna - (minus) och + (plus) sänka eller höja din dos.**
- **Behandling.** Till vänster på displayen står det Dose 1 x det innebär att dosen som är inställd ges 1 gång därefter slocknar lampan.

### Start av behandling

- När du ställt in lampan på rätt dos enligt ditt behandlingsschema enligt ovan, tryck på den gröna knappen OK. Dosen ställs in i Joule/cm<sup>2</sup>.
- För att hålla rätt exponeringsavstånd ska du stå framför ljusarmaturen så att tårna når distansen/den runda metallstaven på lamparmaturen. Viktigt att stå på samma sätt vid varje behandling annars är risken att du kan bränna dig.
- Ta på dig skyddsglasögon som skyddar dig mot UV-strålning.
- Vid start tryck på den svarta startknappen som sitter till vänster om displayen.



- Ska du behandla någon mer kroppsidea/hudområde får du ställa in dosen och trycka på startknappen igen.

- Precis vid start av enheten visar displayen detta i några sekunder:



- Därefter visas återstående exponeringstid i minuter och sekunder:



- När slutet av exponeringstiden uppnåtts slocknar UV-rören automatiskt och behandlingen avslutas med en hörbar signal.

Behöver du avbryta behandlingen tryck på **ESC**-knappen som finns på mitten av displayen.

Vid behov av kontakt med oss, tala om att du har en lånelampa.

## Kontakt

Vad gäller inställningar och andra problem med ljusarmaturen eller din behandling ring

**dagtid: 031-342 19 86** eller **342 11 12**

**Måndag, tisdag, onsdag, fredag** 7.30-11.45, 12.45-15.30 **torsdagar** 09.00-11.45, 12.45-15.30

**Övrig tid (gäller endast om du bränt dig och/eller fått kraftig rodnad):**

ring Sahlgrenskas växel på 031-342 10 00 och be att få kontakt med hudbakjouren.