


Hörselverksamhet
2023-04-25

Skötsel av hörapparat med formgjuten insats

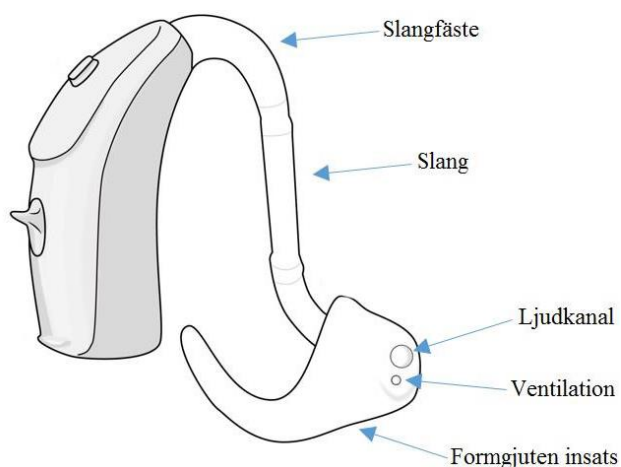

Slang


Slangen sitter mellan slangfästet och insatsen. Slangen bör bytas ut ungefär en gång varannan månad. För att trä på den nya slangen kan du försöka töja ut den med till exempel en blyertspenna. För att få rätt längd på slangen kan den tidigare slangen användas som mall. Har slangen tagit slut kan du ringa din audionommottagning och be att få mer hemskickad via posten.

Insats


Daglig rengöring: Torka bort vax från insatsen med vanligt hushållspapper eller torr trasa. Se till att ljudkanalen och ventilationen är fria från vax. Vax i insatsen försvagar förstärkningen.

Veckovis rengöring: Varje vecka (eller vid behov) bör insatsen rengöras genom att lägga den i varmt eller ljummet vatten med diskmedel eller tvål i, låt den ligga i cirka 15 minuter.


Rengöring av den formgjutna insatsen

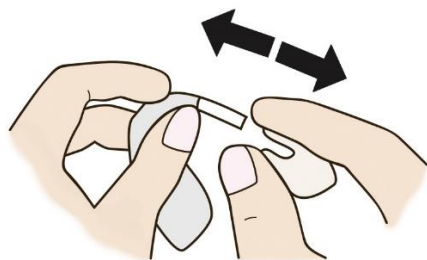

1. Ta loss insatsen från slagen

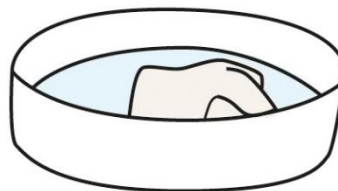


2. Lägg insatsen i ljummet vatten med tvål eller diskmedel i ca 15 min

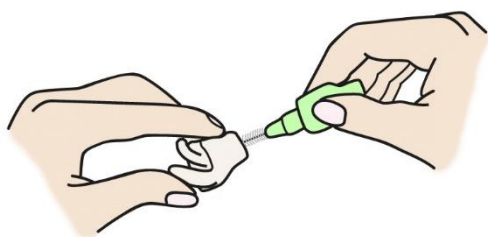

3. Använd en mellanrumstandborste för att rengöra ljudkanal och ventilation




4. Skölj av insatsen och ljudkanalen med rinnande vatten så all tvål är borta

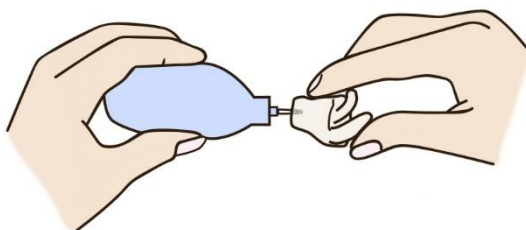


5. Blås ut vatten som kan finnas kvar ur ljudkanal och ventilation



6. Insatsen kan få torka över natten (Valfritt steg)

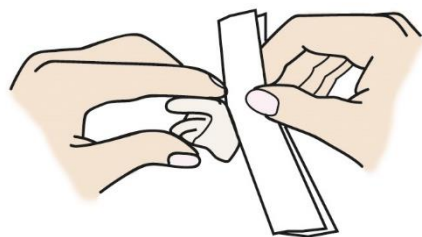

7. Kontrollera att insatsen har torkat med vanligt hushållspapper

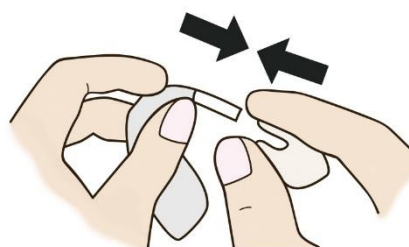

8. Fäst insatsen på slangen igen

Sätt ihop rätt hörapparat med rätt insats:

Vänster blå Höger röd