




Hörapparat ”allt i örat”

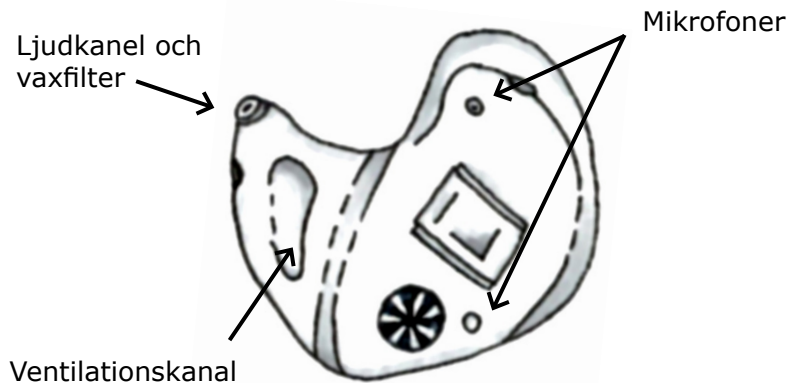

Informationen i bladet är generell och gäller för de flesta hörapparater. Hanteringen av dina hörapparater kan därmed skilja sig något mot vad som anges här.

Instruktioner för skötsel och felsökning finns i första hand i bruksanvisningen för ditt hjälpmedel. Har du tappat bort den du fick när hjälpmedlet provades ut, kan du kontakta din mottagning och få en ny. Många leverantörer har också bruksanvisningen tillgänglig på sina webbsidor.

Om du har två hörapparater är de märkta med färger så du kan skilja på dem.

 Vänster  Höger

Skötsel och dagligt underhåll av hörapparater

Rengöring

- Torka av hörapparaten efter användning.
- Rengör hörapparaten regelbundet. Se till att ventilationskanalen är fri från vax och smuts. Använd medföljande rensnål och borste för att rengöra detta.

Vaxfilter

- Vaxfiltret byts vid behov eller varannan månad. Vaxfiltret går ej att rengöra, högtalaren kan gå sönder om du petar i den. När vaxfiltren är slut beställer du själv nya. Kontakta din audionommottagning om du är osäker på vilka vaxfilter du ska beställa.

Batteri

- Om du har uppladdningsbara hörapparater laddar du dem varje dag. Förvara hörapparaterna i laddaren då du inte använder dem. Låt inte hörapparaterna ligga oladdade under en längre tid - detta kan skada eller förkorta livslängden på batteriet.
- Om du har en hörapparat med utbytbart batteri ska du byta batterier vid behov.

Har du tappat bort din hörapparat?

Kontakta oss i första hand genom att logga in på 1177.se och skicka ett meddelande.

Felsökning: Om dina hörapparater är tysta

Testa ifall stegen nedan löser problemet.

Batteri

Med uppladdningsbara batterier: Har du kontrollerat att lampan på hörapparaten lyser när du laddar? Är det ström till laddaren, fungerar laddsladden? Du kan också prova ladda hörapparaten som inte tar laddning där det brukar fungera ladda. Om hörapparaten inte lyser vid laddning kontakta din audionommottagning

Med utbytbara batterier: Har du bytt batteri? Sitter det åt rätt håll?

Vaxfilter och rengöring

Byt vaxfilter. Tänk på att vaxfiltret kan se olika ut beroende på vilken hörapparat du har.


Använd rensnål eller borste för att göra rent inuti ventilationskanalen.

Är hörapparaten fortfarande tyst? Kontakta din Audionommottagning.

Verktyg för att byta filter

För att byta vaxfilter har du fått ett verktyg, tänk på att dessa kan se olika ut beroende på vilken hörapparat du har.


Oavsett hur ditt verktyg ser ut har du en sida för att plocka bort det gamla vaxfiltret och en sida med ett nytt vaxfilter.

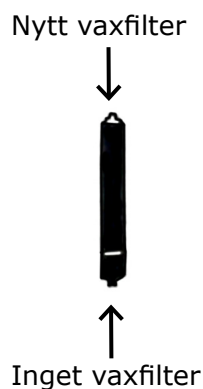


Verktyg för att göra rent ljud- och ventilationskanal.




Gör rent hörapparaten

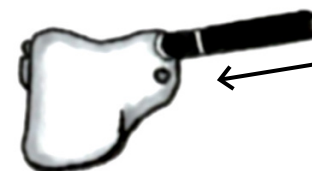


För in verktyget med sidan utan vaxfilter in i hörapparatsens gamla vaxfilter.

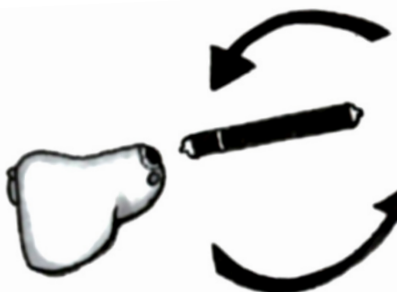

Dra verktyget rakt ut. Det gamla vaxfiltret följer med ut. Vänd på verktyget.

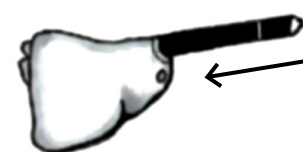

För in verktyget med sidan med vaxfilter in i hörapparatsens högtalare.

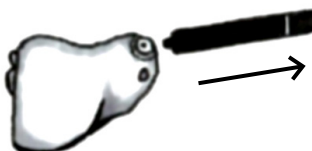

Dra ut verktyget och se till att vaxfiltret har fastnat i din högtalare.