

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2022-10-26

Innehållsansvar: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Giltig till: 2024-10-26

Granskad av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Godkänd av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Instruktion för användning av andningsskydd

Regional instruktion

Utarbetad av Vårdhygien i Västra Götalandsregionen

Syfte

Instruktionen är ett stöd för korrekt användning av andningsskydd med filterfunktion FFP2 eller FFP3.

Hantering av andningsskydd


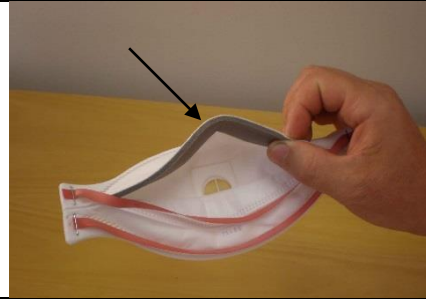



Tillverkarens anvisning ska följas.

Det finns flera olika varianter av andningsskydd på marknaden. Andningsskyddet har ett högt andningsmotstånd och kan vara försett med en ventil (övertäckt eller öppen), som minskar andningsmotståndet men innebär att utandningsluften från bäraren inte filtreras.

Andningsskydd:

- tas på och tas av utanför rum/bostad där personen vårdas.
- kompletteras med ett heltäckande visir för skydd mot eventuellt stänk mot ansikte hos person med luftvägssymtom. Är andningsskyddet vätskeavvisande (märkt med IIR) kan det kombineras med skyddsglasögon.
- användningstid enligt tillverkarens anvisning, så länge det inte har tagits av, skadats eller förorenats men av arbetsmiljöskäl bör inte användningstiden överskrida 4 timmar.
- är av engångstyp och kasseras efter varje användning. De ska inte återanvändas.
- måste sluta tätt mot ansiktet för att fylla sin funktion. Skägg/skäggstubb kan förhindra detta, vilket innebär risk för smitta.

Så tas andningsskydd på:

	<p>Exempel på andningsskydd med respektive utan ventil.</p>
	<p>Desinfektera händerna innan. Näsbygeln är placerad i övre delen av masken. Forma bygeln genom att böja den försiktigt på mitten.</p>
	<p>Lägg masken i den ena handen och vik ut den undre delen för att forma masken till en kupa. Vänd masken och ta med andra handen tag i banden.</p>
	<p>Placera masken under hakan, över ansiktet samt dra banden över huvudet.</p>
	<p>Placera det undre bandet runt nacken och det övre bandet uppe på huvudet. Justera maskens övre och undre del tills acceptabel komfort uppnås.</p>

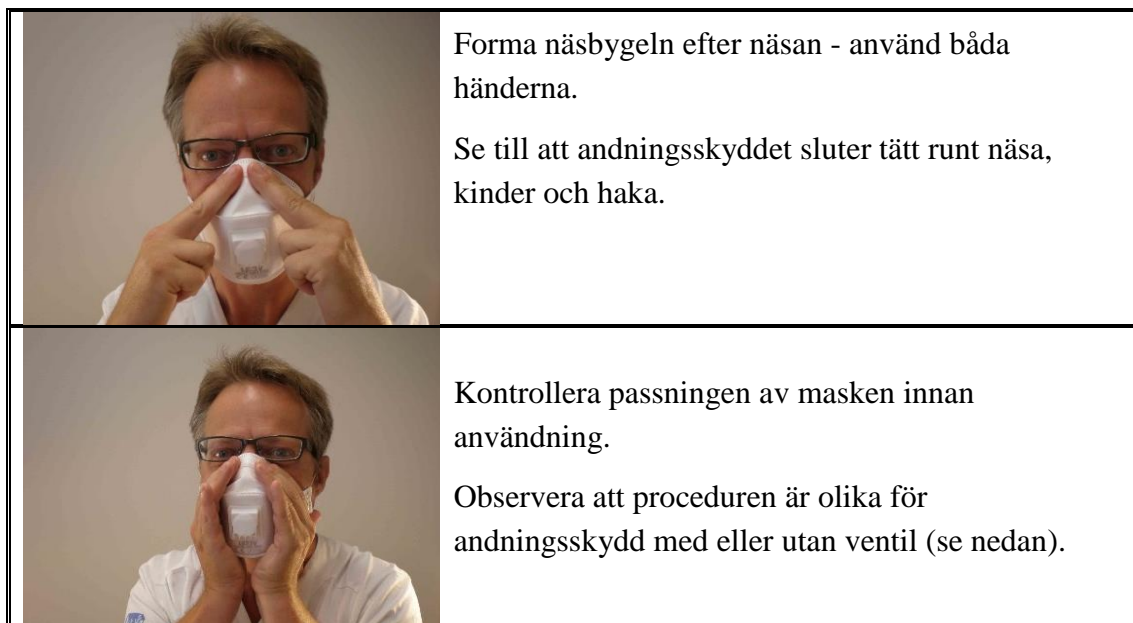


Foto: Vårdhygien Halland

Tillpassning av andningsskydd

Sker enligt tillverkarens anvisning men om inget annat anges följ nedanstående.

För andningsskydd utan ventil - kupa båda händerna runt masken och **andas ut kraftigt**.

Vid läckage, korrigera näsbygeln, masken och/eller banden.

För andningsskydd med ventil - kupa båda händerna runt masken och **andas in kraftigt**.

Vid läckage, korrigera näsbygeln, masken och/eller banden.

Så tas andningsskydd av

Andningsskydd tas av utanför rum/bostad där personen vårdas.

- Desinfektera händer och vid behov underarmar.
- Rör inte själva andningsskyddet, endast remmarna bakom huvudet. Detta underlättas genom att du lutar dig lätt framåt.
- Ta det nedre bandet först, därefter det övre bandet och lyft andningsskyddet från ansiktet medan du håller i remmarna. Undvik att röra ansiktet.
- Kassera andningsskyddet direkt i avfallspåse.
- Desinfektera händer och vid behov underarmar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Granskad av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Godkänd av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Dokument-ID: HS9766-305841775-266

Version: 6.0

Giltig från: 2022-10-26

Giltig till: 2024-10-26