

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2026-02-03

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-04-30

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Sinus navigation K+ med skelett- och mjukdelsfönster (815866)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

På begäran av ÖNH-kliniken ska frontalbenet vara med på bilden.

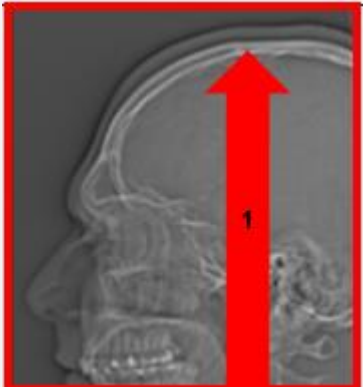
Förändringar sedan föregående version

PVK specificerad.

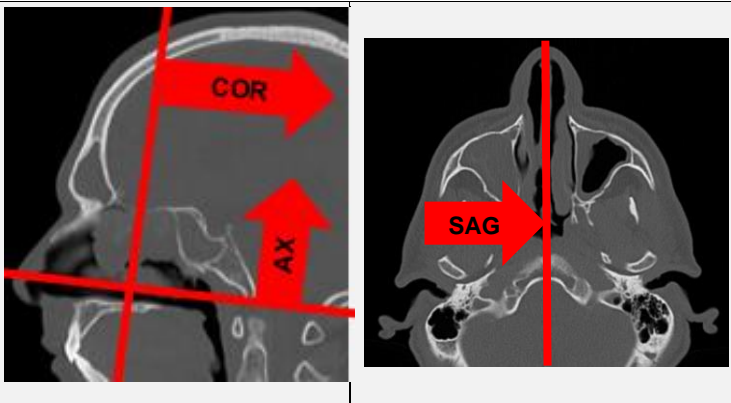
Inför undersökningen

Indikation	Preoperativ kartläggning inför abscessdränering på begäran av öronläkare.
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Patienten ska snyta sig.• Kreatinin och GFR• PVK, helst rosa. Helst i höger arm• Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband och allt annat på huden. OBS! Stabiliserande pannband och kuddar får inte användas eftersom dessa stör beräkningarna.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	<ul style="list-style-type: none">• Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Hals split bolus 1"• Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Hals split bolus 2"
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Huvudet mot gantryt.• Huvudstöd i lägsta läget.• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.• Viktigt att patienten ligger helt rakt från början, eftersom navigationsserien inte vinklas.

Bildtagning

Scout	IV kontrast bolus 1	Bolus 2 50 s efter bolus 1	Serie 1 2 min från start	
Bild/serie	Inställning			
Scout	Hakspets – skalltak.			
1. Sinus K+	↑ Sinus maxillaris underkant till hjärsstak (hela nästippen skall vara med).			

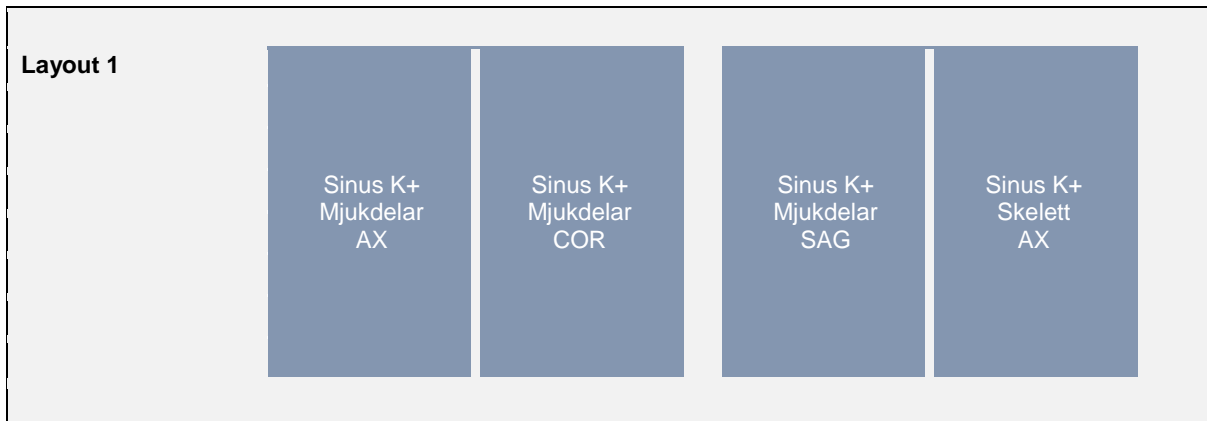
Reformatering

Projektion	Inställning	
AX mjukdelar	Ska ej rätas upp eller vinklas, utan lämnas orörd så att ÖNH kan använda den i sitt program på operation. DFOV skall vara 180 x 180 mm som standard.	
AX	Parallellt med hårda gommen.	
COR	Vinkelrätt mot AX.	
SAG	Parallellt med medellinjen.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Sinus K+					
↳ mjukdelar	AX	1/1	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS
	COR	1/1	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS
	SAG	1/1	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS/ Syngo.via
Skelett	AX	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
Mjukdelar	AX	1/1	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,
Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-174498515-172

Version: 4.0

Giltig från: 2026-02-03

Giltig till: 2027-04-30