

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-03-10

Innehållsansvar: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Giltig till: 2027-03-10

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

DT Aorta hela K- (839000)

Förändringar i denna version

Ny metodbeskrivning.


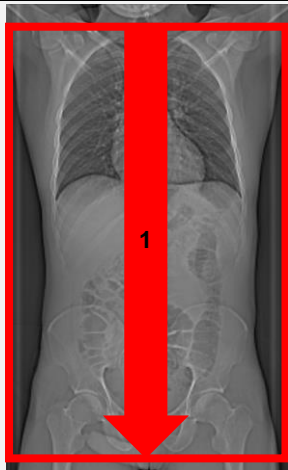
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


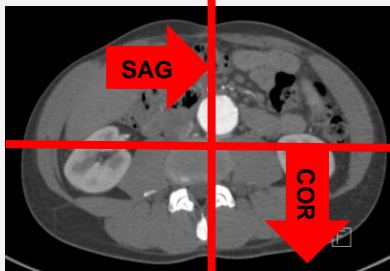
Inför undersökningen

Indikationer	Kontroll av aneurysm, dissektion mm.
Förberedelser	Inga
PO kontrast/dryck	Ingen
IV kontrast	Ingen
Strålskydd	Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet.

Bildtagning

		
Bild/serie		Inställning
Scout		Jugulum – trochanter minor.
1. Aorta hela K+		↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Justeras så att anatomin blir symmetrisk. DFOV ska omfatta hela thorax och buk med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen.		
COR	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		
SAG	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Aorta hela K-	COR	3/2	Bv36/Standard/FC08	C100 W700	PACS
	SAG	3/2	Bv36/Standard/FC08	C100 W700	PACS
	AX	0,6/0,6	Bv36/Standard/FC08	C100 W700	Syngo.via/ PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1			
	Aorta hela K- AX	Aorta hela K- COR	Aorta hela K- SAG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,
Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-174498515-177

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-10

Giltig till: 2027-03-10