

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-02-12

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-12

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Axel – Funckbilder

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning Funckbilder

Strålskydd [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats Ryggbord
Takstativ

Detektor Bild 1 – Potter med raster
Bild 2 – Liten-lös detektor
Bild 3 – Potter med raster

Bildtagning 1. Frontal
2. Funck 2 (epålett-variant)
3. Funck 3

Bildtagning

Frontal

Underarmen vilar böjd mot midjan.

Handen pronerad.

Vrid patientens axel 45° mot detektorn/bildplattan alternativt vinkla röret.

Vinkla rörarmen 15° kraniellt (caput humeri friprojiceras från acromion).

Centrera på leden.

Sträva efter att komma in i leden.

Kriterier

Caput humeri friprojiceras från acromion.

Frontal höger



Frontal vänster



Funck 2 – epålett-variant (sida på cavitas glenoidalis)

Patienten i bukläge med aktuell axel på en hård kudde.

Huvudet vänt från den aktuella sidan.

Patientens arm hänger över kanten på bordet.

Detektorn/bildplattan placeras ovanför patientens axel.

Horisontell strålriktning.

Vinkla in i axillen cirka 15-25° från horisontalplanet (ev. även vinkling några grader kraniellt).

Kriterier

Cavitas glenoidalis ledyta tangeras och är friprojierad.


Funck 2 höger



Funck 2 vänster



Funck 2 skiss

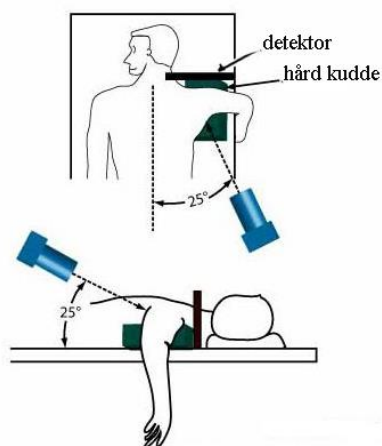

**Funck 3
(caput humeri)**

Detektor/bildplatta i potter.

Patienten i ryggläge.

Handen på huvudet, låt armbågen
peka mot taket.

Vertikal strålriktning.

Vinkla 10-40° kaudalt.

Centrera över leden.


Funck 3 höger



Funck 3 vänster



Funck 3 skiss

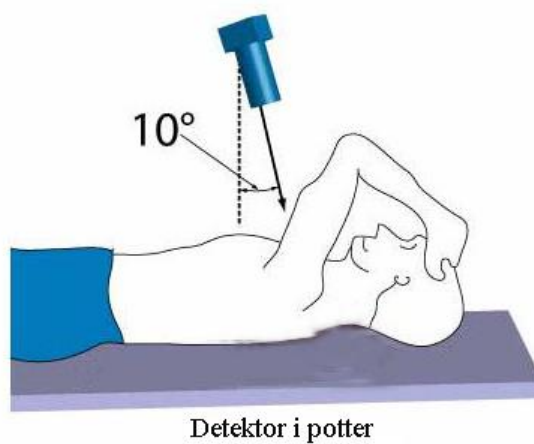

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-109

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-12

Giltig till: 2027-02-12