

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-22

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-22

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Atypisk njurcysta K-/K+ (841900A)

Förändringar i denna version

Reviderad, justerat kernel Siemens X-cite.


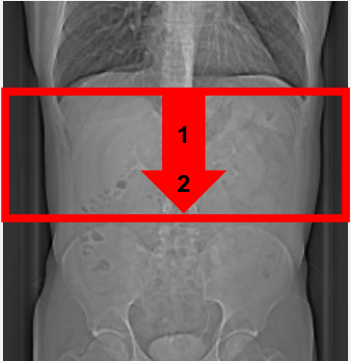
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

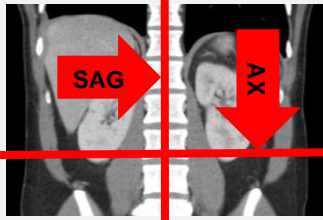
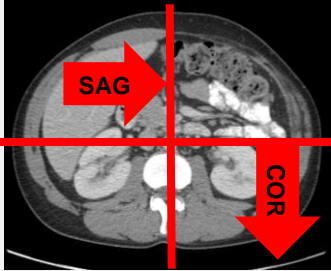
Inför undersökningen

| | |
|--------------------------|--|
| Indikation | Karaktärisering (Bosniakklassifikation) av atypisk njurcysta. |
| Förberedelser | <ul style="list-style-type: none"> • Kreatinin och GFR. • PVK, helst rosa. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Buk venös". |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | <ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  | |  |
|---|---|--|
| Bild/serie | Inställning | |
| Scout | Mamiller – höftleder. | |
| 1. Njurar K- | ↓ Nedanför diafragma – crista iliaca. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i> | |
| 2. Njurar K+ nefrografisk fas | ↓ Nedanför diafragma – crista iliaca. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i> | |

Reformatering

| Projektion | Inställning | | |
|------------|---|---|--|
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela övre buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. | | |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. | | |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
|--------------|------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 1. Njurar K- | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| 2. Njurar K+ | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-155

Version: 11.0

Giltig från: 2026-01-22

Giltig till: 2028-01-22