

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

## DT Axel (862000)

### Förändringar i denna version

Inga förändringar.


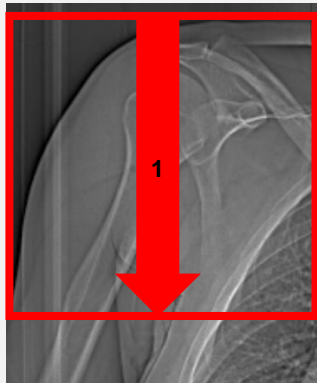
### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


### Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Skelettskada, felställning mm.
<b>Förberedelser</b>	Inga.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ryggläge.</li> <li>• Huvudet mot gantryt.</li> <li>• Den aktuella sidans arm intill kroppen, med axeln så nära isocenter som möjligt.</li> <li>• Motsatt sidas arm ovanför huvudet.</li> </ul>

### Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför axeln – mellersta humerus.	
1. Axel K-	↓ Ovanför axeln – mellersta humerus. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>	


## Reformatering

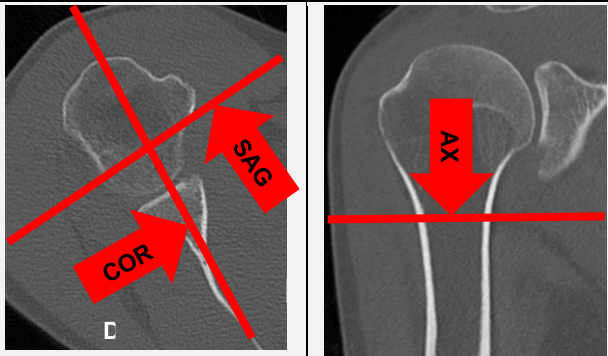Projektion	Inställning		
AX	Vinkelrätt mot humerus längsaxel. DFOV ska omfatta laterala hälften av klavikeln.		
COR	Parallellt med spina scapulae, framifrån – bak.		
SAG	Vinkelrätt mot COR, inifrån – ut.		

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Axel K-	AX	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS

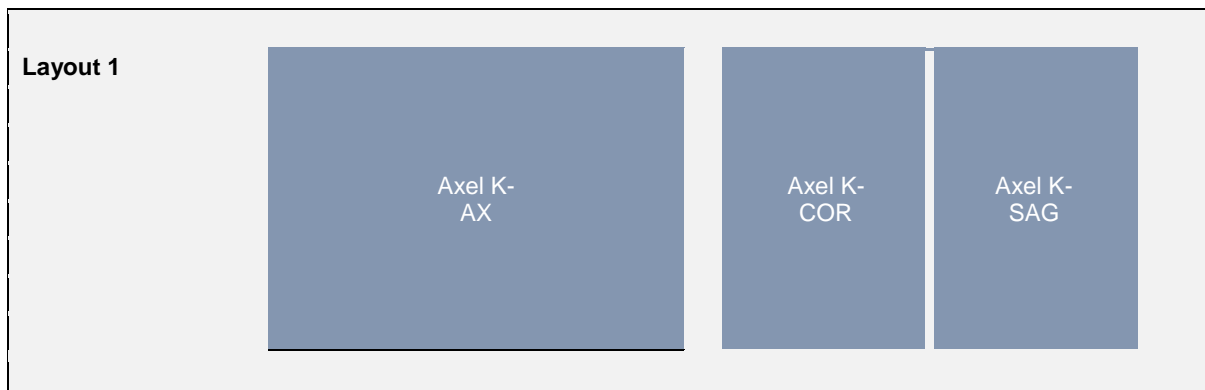

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-156

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-01-16

**Giltig till:** 2028-01-16