

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2024-11-13

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Giltig till: 2026-11-13

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

# DT BÖS (840706A)

## Förändringar sedan föregående version

Reviderat, justerat kernel Siemens X-cite.


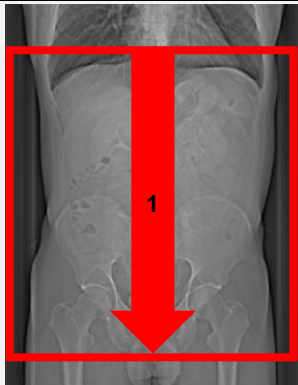
## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


## Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Fri gas, ileus, konkrement, hydronefros mm. I första hand för patienter <60 år.
<b>Förberedelser</b>	Inga.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ryggläge.</li><li>• Fötterna mot gantryt.</li><li>• Armarna ovanför huvudet.</li></ul>

## Bildtagning

	
<b>Bild/serie</b>	<b>Inställning</b>
<b>Scout</b>	Mamiller – trochanter minor.
<b>1. Buk K- (lågdos)</b>	↓ Diafragma – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>

## Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen.		
COR	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		
SAG	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Buk K- (lågdos)	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C50 W450	Syngo.via/ PACS
	COR	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	SAG	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

**Godkänd av:** Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-172

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-11-13

**Giltig till:** 2026-11-13