

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Fot (872000)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


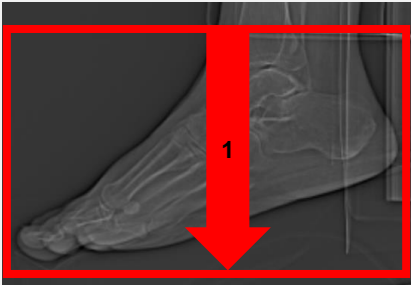
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

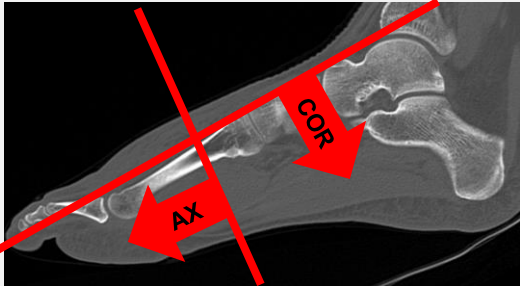

Indikationer	Skelettskada, felställning mm.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Den aktuella foten så nära isocenter som möjligt. • Motsatt sidas ben böjs undan.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför fotleden – nedanför tårna.	
1. Fot K-	↓ Hela foten.	

Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Vinkelrätt mot metatarsalbenens längsaxel.
COR	Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, framifrån – bak.
SAG	Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, inifrån – ut.

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Fot K-	AX	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1

Fot K- AX	Fot K- COR	Fot K- SAG
--------------	---------------	---------------

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-182

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16