

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Hals/thorax/buk K- (818000A, 830000 & 840000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| | |
|--------------------------|--|
| Indikationer | Tumör, metastaser, lymfom mm, där varken PO eller IV kontrast är aktuellt. |
| Förberedelser | Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | <ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Fötterna mot gantryt.• Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget.• Hals: Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.• Thorax/buk: Armarna ovanför huvudet. |


Bildtagning

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| Bild/serie | Inställning | |
| Scout | Ovanför ytterörat – trochanter minor. | |
| 1. Hals K- | ↑ Arcus aortae – orbitas underkant. <i>Patienten ska andas lugnt och inte svälja.</i> | |
| 2. Thorax/buk K- | ↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i> | |
| <p>Efter scanning segmenteras serie 2 i thorax och buk. Hals, thorax och buk läggs på separata kort och reformateras som vanligt.</p> | | |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1. Hals K- | AX | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
| | COR | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
| | SAG | 5/3 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
| | AX | 0,6/0,6 | B45/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| 2. Thorax/buk K- | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| ↳ Mediastinum K- | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| ↳ Lungor K- | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| | COR | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| | SAG | 3/3 | B31/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| ↳ Buk K- | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

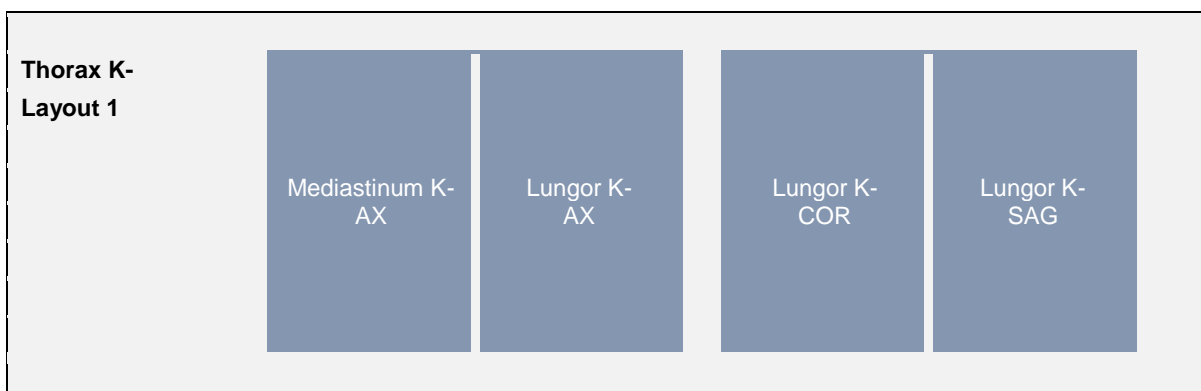

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-192

Version: 6.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16