

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-22

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-22

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Hals/larynx K+ (818800B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

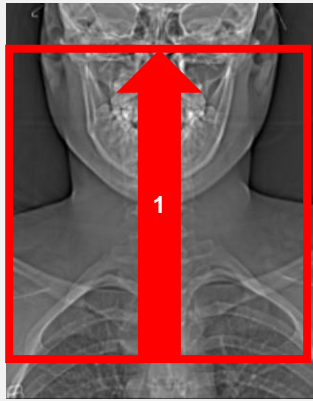
Förändringar sedan föregående version

Reviderat kernel Siemens X-cite.

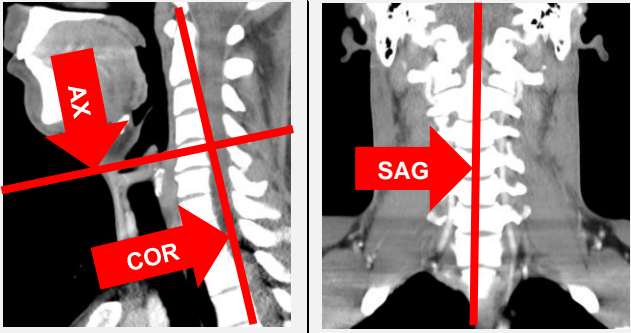
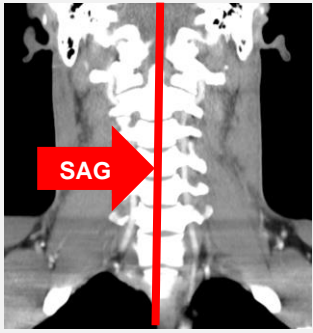
Inför undersökningen

Indikationer	Tumör i hypofarynx eller larynx.
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Kreatinin och GFR.• PVK, helst rosa, gärna i höger arm.• Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	<ul style="list-style-type: none">• Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Hals split bolus 1".• Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Hals split bolus 2".
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Huvudet mot gantryt.• Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget.• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

Scout	IV kontrast bolus 1	Bolus 2 50 s efter bolus 1	Serie 1 2 min från start	
Bild/serie	Inställning			
Scout	Ovanför ytterörat – sternum.			
1. Hals K+	↑ Arcus aortae – orbitas underkant. <i>Patienten ska andas lugnt, fonera "iiii" och inte svälja.</i>			

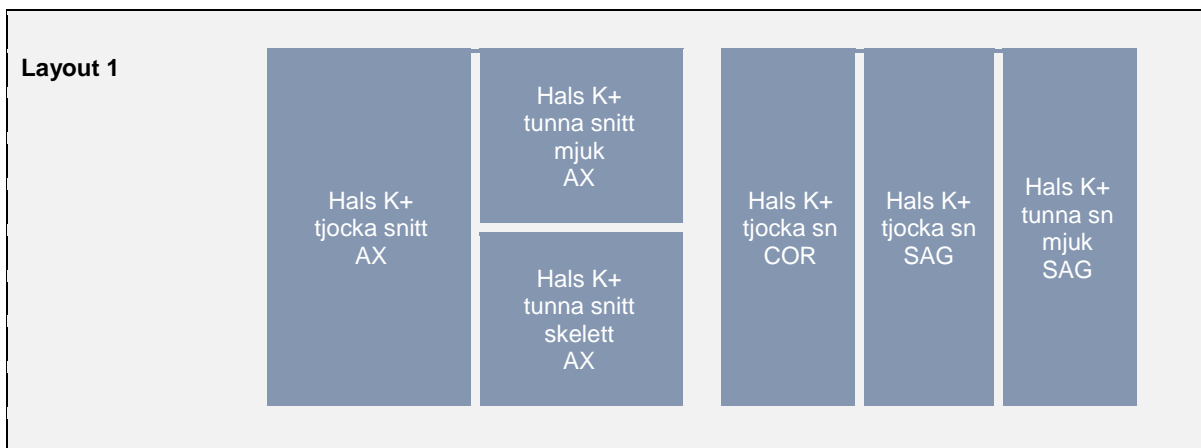
Reformatering

Projektion	Inställning	
AX	Parallellt med stämbanden, ungefär motsvarande disken C4-C5. DFOV ska nå laterala delen av klaviklarna (200-250 mm).	
COR	Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot AX.	
SAG	Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot COR.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Hals K+	↳ tjocka snitt				
	COR	5/3	Br44/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	SAG	5/3	Br44/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	↳ tunna snitt skelett				
	AX	0,6/0,6	Br60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br44/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS/ Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-200

Version: 8.0

Giltig från: 2026-01-22

Giltig till: 2028-01-22