

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Giltig till: 2026-11-26

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

## DT Hals/munhåla K- (818000C)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

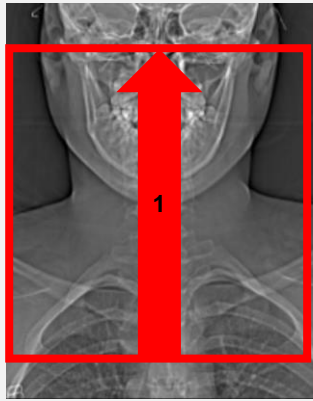
### Förändringar i denna version

Inga förändringar.

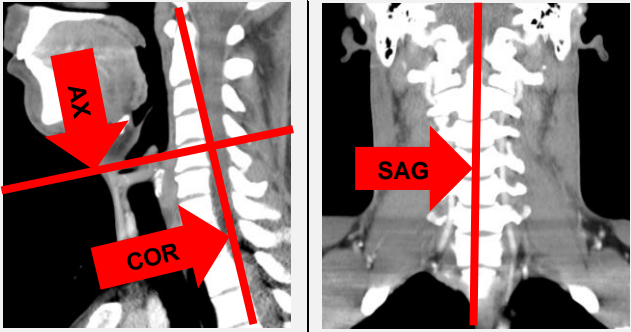
### Inför undersökningen

<b>Indikation</b>	Tumör i munhålan, när K+ inte är aktuellt.
<b>Förberedelser</b>	Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ryggläge.</li><li>• Huvudet mot gantryt.</li><li>• Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget.</li><li>• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.</li></ul>

## Bildtagning

Scout	Serie 1	
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför ytterörat – sternum.	
1. Hals K-	↑ Arcus aortae – orbitas underkant. <i>Patienten ska andas lugnt genom näsan, pressa samman läpparna och blåsa upp kinderna ("puffed cheeks") och inte svälja.</i>	

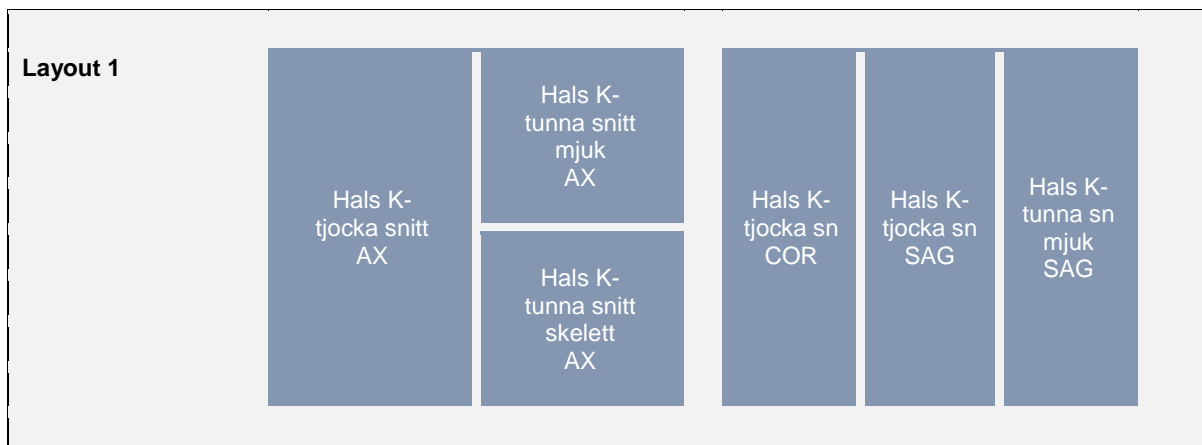
## Reformatering

Projektion	Inställning	
AX	Parallellt med stämbanden, ungefär motsvarande disken C4-C5. DFOV ska nå laterala delen av klaviklarna (200-250 mm).	
COR	Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot AX.	
SAG	Parallellt med kotpelaren. Vinkelrätt mot COR.	

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv	
1. Hals K-	↳ tjocka snitt	AX	5/3	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
		COR	5/3	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
		SAG	5/3	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	↳ tunna snitt mjuk	AX	1/1	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
		SAG	1/1	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	↳ tunna snitt skel	AX	1/1	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B45/Detail/FC26-08	C40 W350	Syngo.via PACS	
Scout	-	-	-	-	PACS	
Dosrapport	-	-	-	-	PACS	

## Hängning PACS



## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

**Godkänd av:** Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-202

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-11-26

**Giltig till:** 2026-11-26