

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-20

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-20

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Handled (866000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.


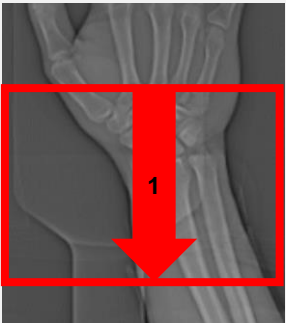
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

Indikationer	Skelettskada, felställning mm.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Sideläge (handryggen mot bordet). • Huvudet mot gantryt. • Den aktuella handleden på kudde ovanför huvudet, så nära isocenter som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Knogar – mellersta radius.	
1. Handled K-	↓ Hela handleden.	

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Vinkelrätt mot radius längsaxel.		
COR	Parallellt med radius längsaxel, framifrån – bak.		
SAG	Parallellt med radius längsaxel, i riktning mot radius.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Handled K-	AX	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	2/2	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1	
----------	--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-207

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-20

Giltig till: 2028-01-20