

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-02-09

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-02-09

Godkänd av: Béla Tabár, (blata1), Överläkare

DT Hjärna K- (810000A)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


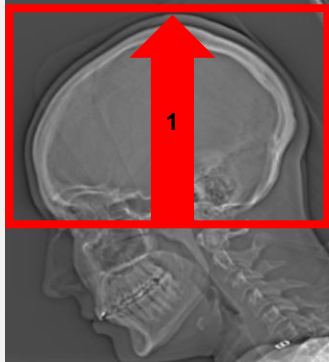
Förändringar sedan föregående version

Reviderad, ändrat Kernel.

Inför undersökningen

Indikationer	Blödning, infarkt, hydrocefalus mm.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i högsta läget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Hakspets – skalltak.	
1. Hjärna K-	↑ Bakre skallgrop – skalltak.	

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Parallellt med HYFA-planet (från hypofysens nederkant till fjärde ventrikeln bakre spets). DFOV 240 mm eller automatiskt DFOV som standard.		
COR	Parallellt med pons bakre begränsning.		
SAG	Parallellt med falx.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Hjärna K-	AX	4/4	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	COR	4/4	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	SAG	4/4	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	AX	0,6/0,6	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1			
	Hjärna K- AX	Hjärna K- COR	Hjärna K- SAG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Béla Tabár, (blata1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-208

Version: 9.0

Giltig från: 2026-02-09

Giltig till: 2028-02-09