

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2024-11-26

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Giltig till: 2026-11-26

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

DT Hjärna K- med neurokranium (810000B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


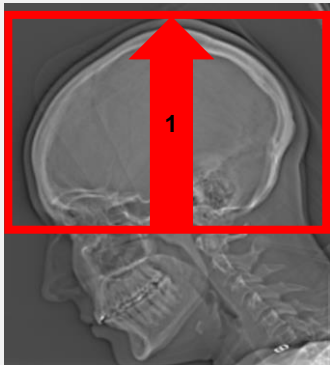
Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

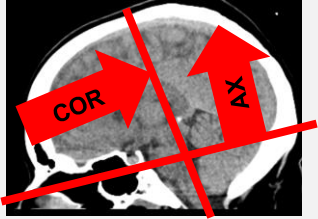
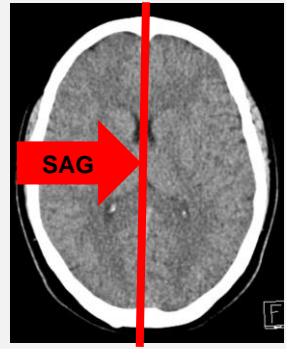
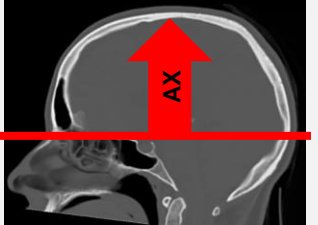
Inför undersökningen

Indikationer	Blödning, infarkt etc med skalltrauma.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Huvudet mot gantryt.• Huvudstöd i högsta läget.• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

	
Bild/serie	Inställning
Scout	Hakspets – skalltak.
1. Hjärna K-	↑ Bakre skallgrop – skalltak.

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX hjärna K-	Parallellt med HYFA-planet (från hypofysens nederkant till fjärde ventrikelns bakre spets). DFOV 240 mm som standard.		
AX neurokranium	Vinklas så att "patienten tittar rakt fram".		
COR hjärna K-	Parallellt med pons bakre begränsning.		
SAG hjärna K-	Parallellt med falx.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Hjärna K-	AX	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	COR	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	SAG	4/4	H32/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	AX	0,6/0,6	H32/Soft/FC26	C35 W80	Syngo.via
↳ neurokranium	AX	1/1	H60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1				
	Hjärna K- AX	Hjärna K- neurokranium AX	Hjärna K- COR	Hjärna K- SAG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-212

Version: 7.0

Giltig från: 2024-11-26

Giltig till: 2026-11-26