

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Knäled (869000)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar vid denna revidering.


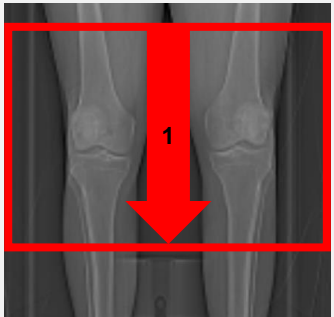
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

Indikationer	Skelettskada, felställning mm.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Fötterna mot gantryt.• Det aktuella knät så nära isocenter som möjligt.

Bildtagning

	
Bild/serie	Inställning
Scout	Ovanför knäleden – nedanför knäleden.
1. Knäled K-	↓ Hela knäleden med ca 10 cm marginal.

Reformatering

Projektion	Inställning	
AX	Vinkelrätt mot tibias längsaxel. DFOV ska omfatta hela knäleden inklusive patella.	
COR	Parallellt med tibias längsaxel, framifrån – bak.	
SAG	Parallellt med tibias längsaxel, inifrån – ut.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Knäled K-	AX	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-218

Version: 7.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16