

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

# DT Mandibel endast corpus (815000C)

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


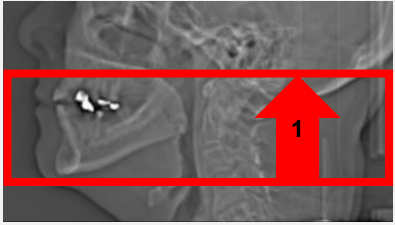
## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Tandrotscystor mm.
<b>Förberedelser</b>	Avlägsna eventuell tandprotes.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ryggläge.</li> <li>• Huvudet mot gantryt.</li> <li>• Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget.</li> <li>• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.</li> </ul>

## Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Halsen – orbitas underkant.	
1. Mandibel K-	↑ Mandibelns bas – halva ramus mandibulae.	

## Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Parallellt med hårda gommen.		
COR	Vinkelrätt mot AX.		
SAG DX	Parallellt med corpus mandibulae dx.		
SAG SIN	Parallellt med corpus mandibulae sin. De sagittala snitten ska delvis överlappa varandra i medellinjen.		

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Mandibel K-	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	COR	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG DX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG SIN	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS

Layout 1
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;">                     Mandibel K- AX                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;">                     Mandibel K- COR                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;">                     Mandibel K- SAG DX                 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;">                     Mandibel K- SAG SIN                 </div> </div>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-234

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-01-16

**Giltig till:** 2028-01-16