

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Mandibel hela (815000D)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


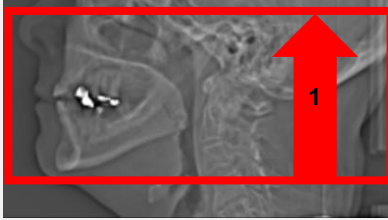
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

Indikationer	Osteonekros mm omfattande hela mandibeln.
Förberedelser	Avlägsna eventuell tandprotes.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Halsen – orbitas underkant.	
1. Mandibel K-	↑ Mandibelnas bas – käkleden.	

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Parallellt med hårda gommen.		
COR	Vinkelrätt mot AX.		
SAG DX	Parallellt med corpus mandibulae dx.		
SAG SIN	Parallellt med corpus mandibulae sin. De sagittala snitten ska delvis överlappa varandra i medellinjen.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Mandibel K-	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	COR	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG DX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG SIN	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Mandibel K- AX </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Mandibel K- COR </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Mandibel K- SAG DX </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a6984; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Mandibel K- SAG SIN </div> </div>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-235

Version: 7.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16