

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Orbita K- (812000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.


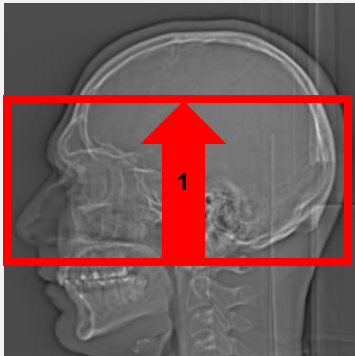
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen


Indikationer	Främmande kropp, exoftalmus och andra frågeställningar, när K+ inte är aktuellt.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Hakspets – skalltak.	
1. Orbita K-	↑ Sinus maxillaris underkant – sinus frontalis överkant.	

Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Parallellt med synnerven.
COR	Vinkelrätt mot AX.
SAG DX	Parallellt med höger synnerv.
SAG SIN	Parallellt med vänster synnerv.

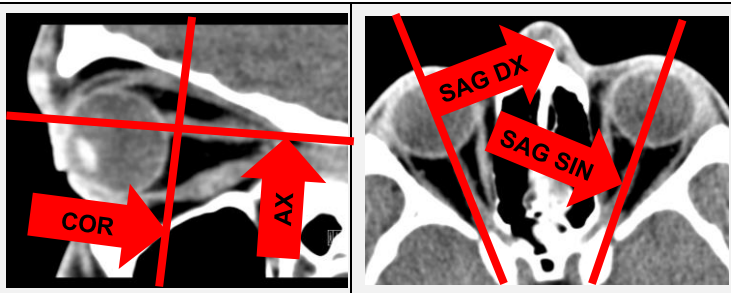

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Orbita K-	AX	2/2	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	COR	2/2	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	SAG DX	2/2	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	SAG SIN	2/2	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	AX	0,6/0,6	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Orbita K- AX </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Orbita K- COR </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Orbita K- SAG DX </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 20px; text-align: center; width: 150px; height: 100px;"> Orbita K- SAG SIN </div> </div>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-248

Version: 6.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16