

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Sinus (806000A)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.


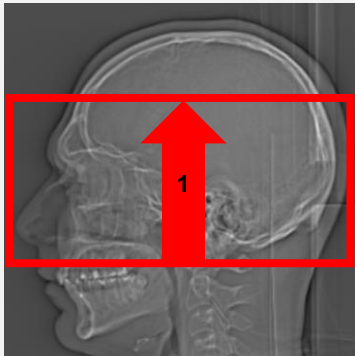
Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

Indikationer	Destruktioner, kronisk sinuit mm.
Förberedelser	Patienten ska snyta sig.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Hakspets – skalltak.	
1. Sinus K-	↑ Sinus maxillaris underkant – sinus frontalis överkant.	

Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Parallellt med hårda gommen.		
COR	Vinkelrätt mot AX.		
SAG	Parallellt med medellinjen. Vinkelrätt mot COR.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Sinus K-	AX	1/1	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	COR	1/1	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG	1/1	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1			

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-254

Version: 6.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16