

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-04-08

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-04-08

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

DT Thorax/buk K- (830000 & 840000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


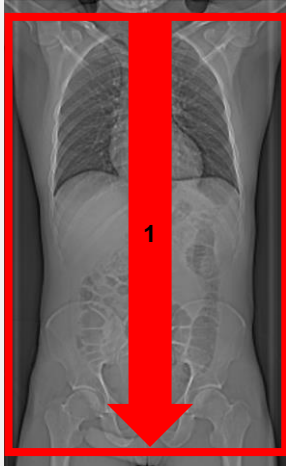
Förändringar i denna version

Reviderad, bytt kernel Siemens.

Inför undersökningen

| | |
|--------------------------|--|
| Indikationer | Tumör, metastaser, lymfom mm, när K+ inte är aktuellt. |
| Förberedelser | Inga. |
| PO kontrast/dryck | 2 glas vatten precis innan undersökningen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | <ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet. |



Bildtagning

|  |  | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------|-----------------------------|------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bild/serie</th> <th>Inställning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scout</td> <td>Jugulum – trochanter minor.</td> </tr> <tr> <td>1. Thorax/buk K-</td> <td>↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i></td> </tr> </tbody> </table> | | Bild/serie | Inställning | Scout | Jugulum – trochanter minor. | 1. Thorax/buk K- |
| Bild/serie | Inställning | | | | | |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. | | | | | |
| 1. Thorax/buk K- | ↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i> | | | | | |
| <p>Efter scanning segmenteras serien i thorax och buk, som läggs på separata kort och reformateras som vanligt.</p> | | | | | | |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. Thorax/buk K- | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/ PACS |
| ↳ Lungor K- | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Standard/FC08 | C-400 W1600 | PACS |
| Lungor K- | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Buk K- | COR | 5/5 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| | SAG | 5/5 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

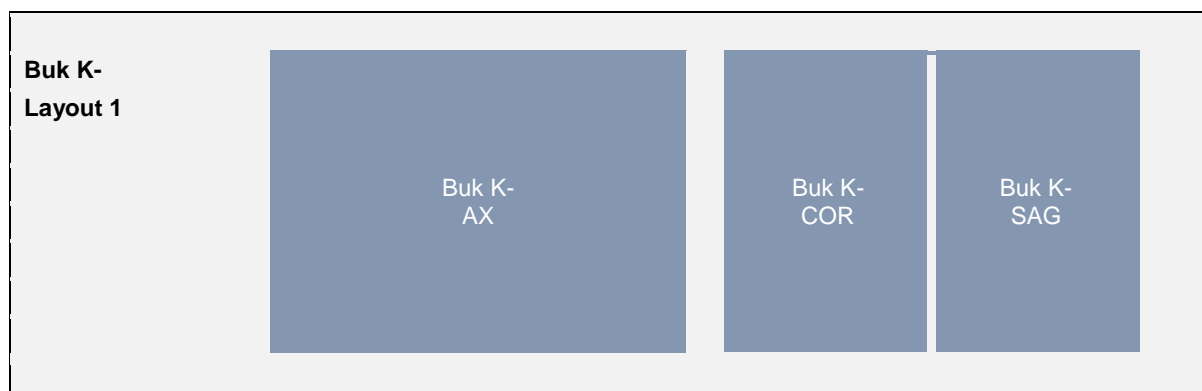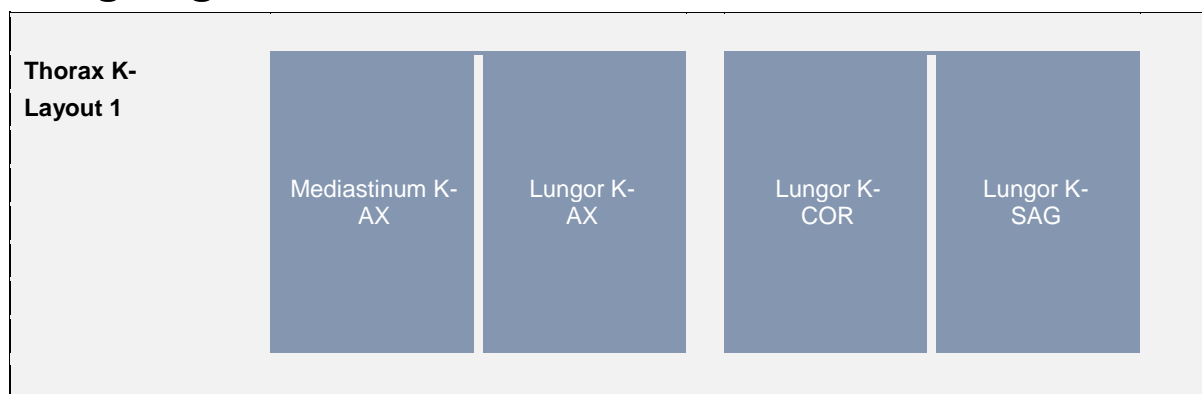

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-263

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-08

Giltig till: 2027-04-08