

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-04-08

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-04-08

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

# DT Thorax/buk K- med PO (830000 & 840884)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


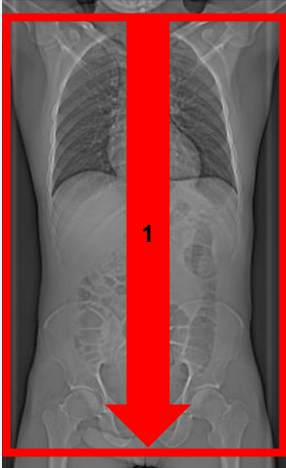
## Förändringar i denna version

Reviderad, bytt kernel Siemens.

## Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Tumör, metastaser, lymfom mm med PO kontrast, där IV kontrast ej kan ges.
<b>Förberedelser</b>	Inga.
<b>PO kontrast/dryck</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 ml Omnipaque 300 mg I/ml blandat med 1 liter vatten intas under 2 timmar före undersökningen.</li><li>• 2 glas vatten precis innan undersökningen.</li></ul>
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ryggläge.</li><li>• Fötterna mot gantryt.</li><li>• Armarna ovanför huvudet.</li></ul>


## Bildtagning

							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bild/serie</th> <th>Inställning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scout</td> <td>Jugulum – trochanter minor.</td> </tr> <tr> <td>1. Thorax/buk K-</td> <td>↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i></td> </tr> </tbody> </table>		Bild/serie	Inställning	Scout	Jugulum – trochanter minor.	1. Thorax/buk K-	↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>
Bild/serie		Inställning					
Scout		Jugulum – trochanter minor.					
1. Thorax/buk K-	↓ Jugulum – trochanter minor. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>						
<p>Efter scanning segmenteras serien i thorax och buk, som läggs på separata kort och reformateras som vanligt.</p>							

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Thorax/buk K-	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C50 W450	Syngo.via/ PACS
↳ Lungor K-	AX	0,6/0,6	Bl64/Standard/FC08	C50 W450	PACS
↳ Lungor K-	COR	3/3	Bl64/Standard/FC52	C-400 W1600	PACS
	SAG	3/3	Bl64/Standard/FC52	C-400 W1600	PACS
↳ Buk K-	COR	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	SAG	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS

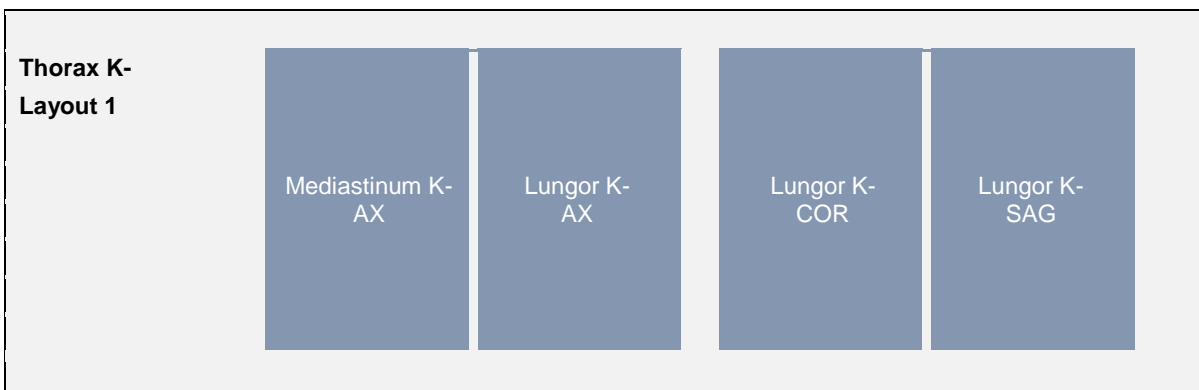

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-264

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-04-08

**Giltig till:** 2027-04-08