

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-19

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-19

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

## DT Underarm (865000)

### Förändringar i denna version

Inga förändringar.


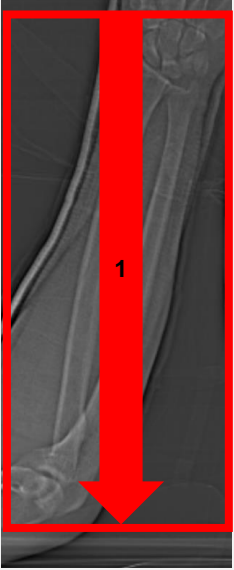
### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.


### Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Skelettskada, felställning mm.
<b>Förberedelser</b>	Inga.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ryggläge.</li><li>• Huvudet mot gantryt.</li><li>• Helst ska den aktuella armen läggas ovanför huvudet. Alternativt kan armen läggas utefter sidan.</li><li>• Underarmen så nära isocenter som möjligt.</li></ul>

## Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför handleden – nedanför armbågen.	
1. Underarm K-	↓ Hela underarmen.	


## Reformatering

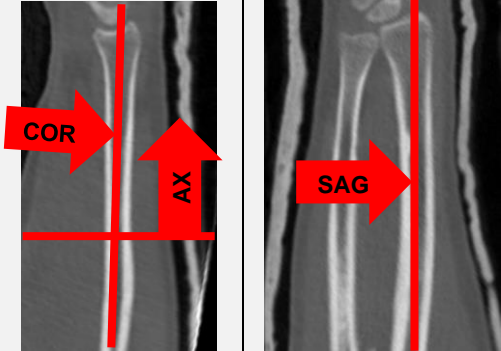Projektion	Inställning	
AX	Vinkelrätt mot radius längsaxel.	
COR	Parallellt med radius längsaxel, framifrån – bak.	
SAG	Parallellt med radius längsaxel, i riktning mot radius.	

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Underarm K-	AX	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS

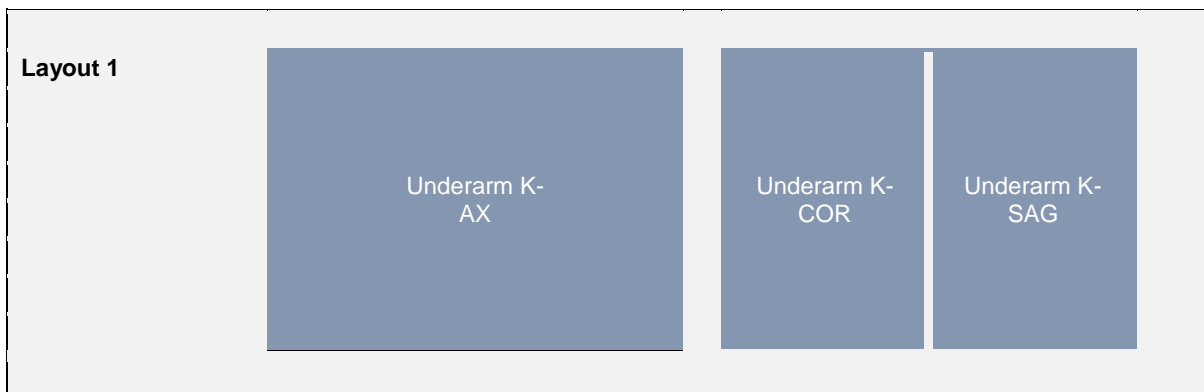

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-280

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-01-19

**Giltig till:** 2028-01-19