

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-28

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Giltig till: 2027-01-28

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

DT Sinus navigation (815066)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

På begäran av ÖNH-kliniken ska frontalbenet vara med på undersökningen.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad: Justerat bilderna. Ändrat kernel Siemens X-cite.

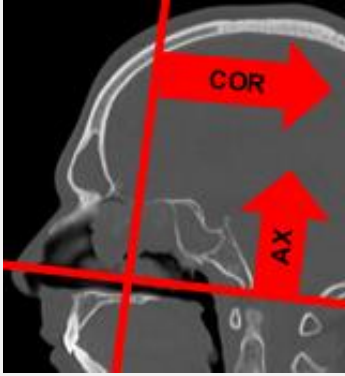

Inför undersökningen

Indikation	Preoperativ kartläggning inför sinuskirurgi.
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Patienten ska snyta sig.• Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband och allt annat på huden. <p>OBS! Stabiliserande pannband och kuddar får inte användas eftersom dessa stör beräkningarna.</p>
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none">• Ryggläge.• Huvudet mot gantryt.• Huvudstöd i lägsta läget.• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.• Viktigt att patienten ligger helt rakt från början, eftersom navigationsserien inte vinklas.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Hakspets – Skalltak.	
1. Sinus K-	↑ Sinus maxillaris underkant till hjasstak (hela nästippen skall vara med).	

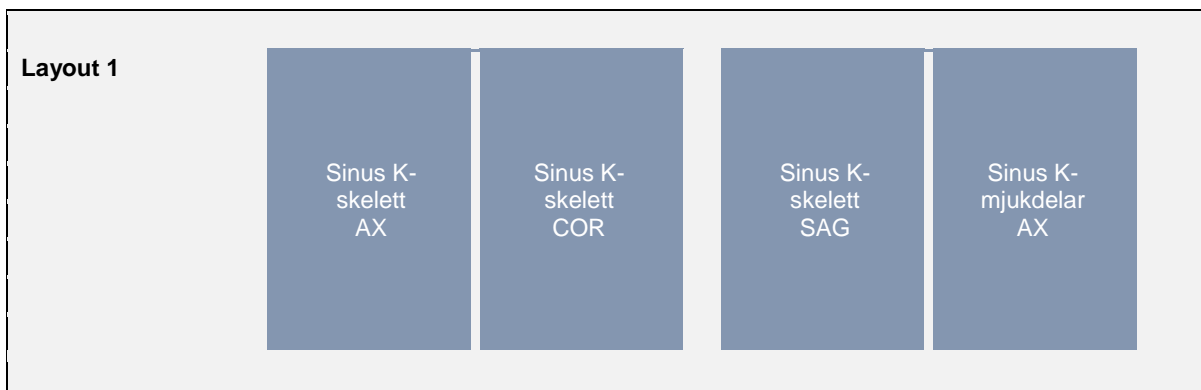
Reformatering

Projektion	Inställning		
AX mjukdelar	Ska ej rätas upp eller vinklas, utan lämnas orörd så att ÖNH kan använda den i sitt program på operation. DFOV skall vara 180 x 180 mm som standard.		
AX skelett	Parallellt med hårda gommen.		
COR skelett	Vinkelrätt mot AX.		
SAG skelett	Parallellt med medellinjen.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Sinus K-	COR	3/3	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	3/3	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS/ Syngo.via
↳ mjukdelar	AX	1/1	Br40/Detail/FC26-08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3),
Specialistläkare

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-8

Version: 11.0

Giltig från: 2025-01-28

Giltig till: 2027-01-28