


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam  
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska  
Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska  
Godkänd av: Carina Karlsson, (carka2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-10

Giltig till: 2026-09-10

## Byte av PEG – Perkutan Endoskopisk Gastrostomi

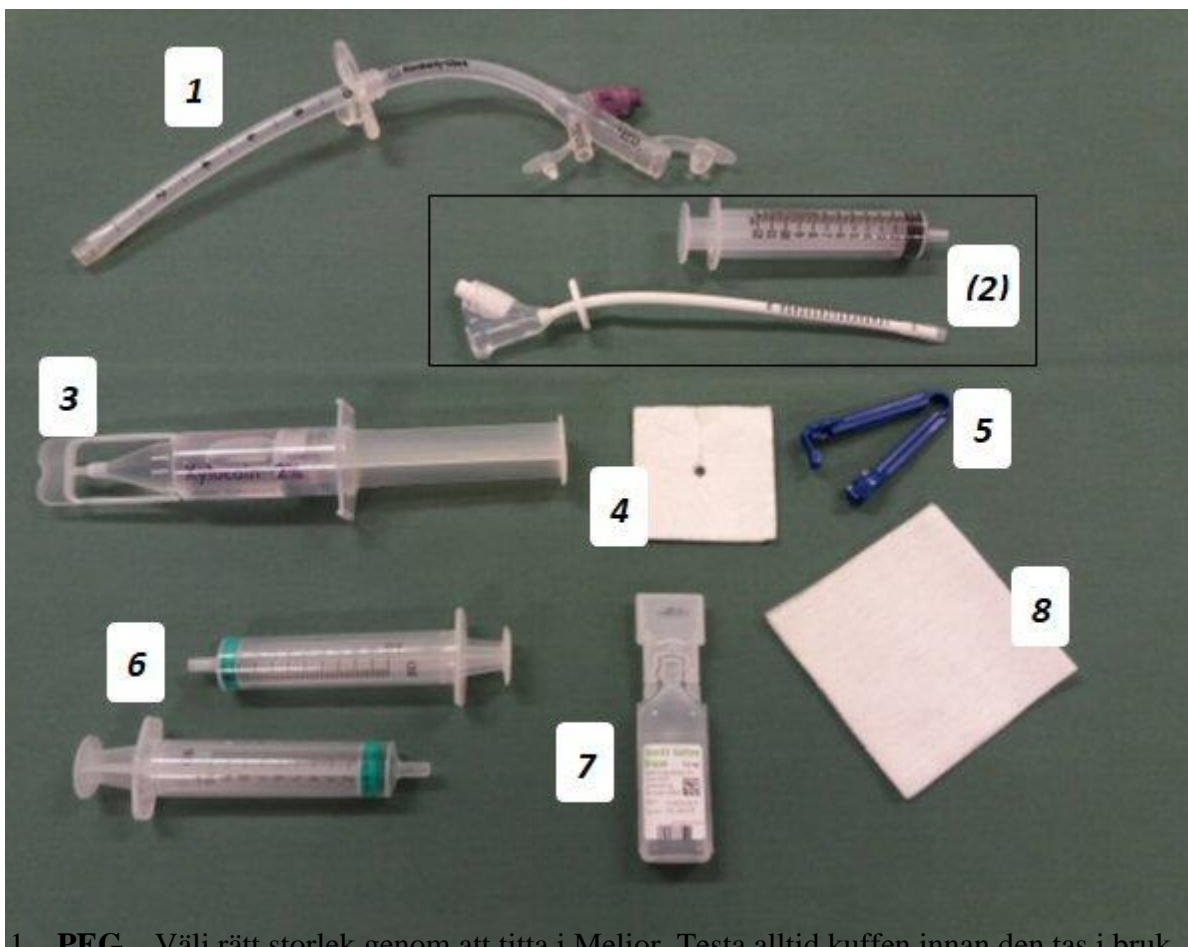

1. **PEG** – Välj rätt storlek genom att titta i Melior. Testa alltid kuffen innan den tas i bruk.
2. **10ml spruta + Mätsticka** - behövs **endast** vid mätning inför byte till knapp.
3. **Xylocaingel** – Lägg en sträng på den del av PEG:en som ska ner i hålet.
4. **Non-woven kompress** – Klippes ur så den ska passa runt PEG (**endast vid behov**, bara om patienten specifikt önskar detta)
5. **Kateterklämna** – som extra stängning av gastrotuben.
6. **2st 10ml sprutor** till i-kuffning och ur-kuffning.
7. **Sterilt vatten** – Används till att kuffa upp med, 7-10ml.
8. **Kompress** – att torka med vid behov, ev. med vatten.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

**OBS!**

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

**Innehållsansvar:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Granskad av:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Carina Karlsson, (carka2), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10103-2096068290-50

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-09-10

**Giltig till:** 2026-09-10