

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

Mammografi av biopsipreparat

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


Inför undersökningen

Indikation	Visualisera kalk.
Undersökningskod	66802 Mammografi av biopsipreparat
Arbetsplats	Siemens Mammomat Revelation
Förberedelser i PACS	Skapa ett undersökningskort för mammografi av biopsipreparat i PACS.

Undersökning


Tillvägagångssätt

1. Lägg biopsikorgen i en plastlåda.
2. Dubbelklicka på InSpect View-knappen.
3. Ett dialogfönster visas och meddelar vilken sida som plastlådan ska röntgas på. Tänd lampa på stativet visar också vilken sida som plastlådan ska placeras.
OBS! Sidoangivelsen anger inte vilket bröst som utreds utan vilken sida på stativet som preparatet ska röntgas på. Tryck OK.

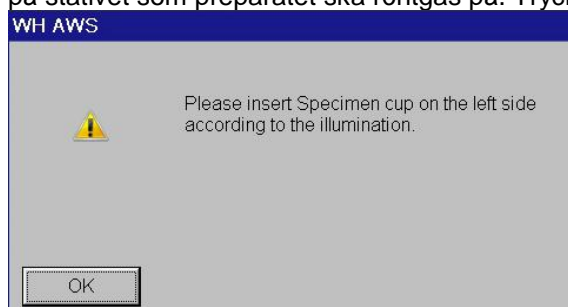



4. Sätt den stängda provlådan med preparatet på biopsitornet.

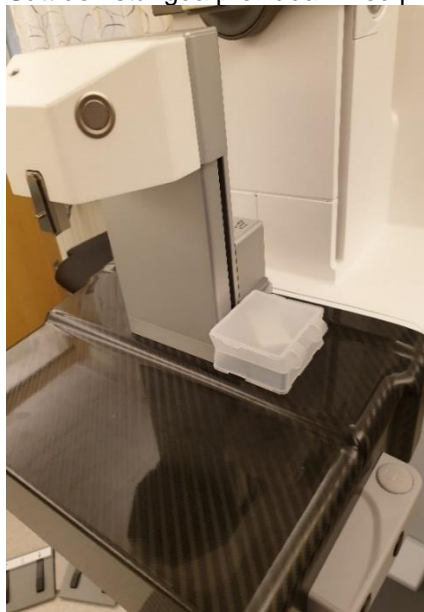

5. Tryck på exponeringsknappen. Röret vinklas 6° åt sidan från plastlådan.
6. Vid behov kan du utföra fler exponeringar genom att lägga till/Add fler bilder med R/L PREPARAT Inspect.
7. Fortsätt enligt metod
- Bröstbiopsi/corebiopsi – stereotaxisk
 - Bröstbiopsi/corebiopsi – tomosyntes
 - Vacorabiopsi/vakuumbiopsi – stereotaxisk

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-35

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05