


Egenmonitorering

# Redigera egenmonitoreringsplan

För att redigera en patient i en egenmonitoreringsplan behöver du först ha lagt upp en egenmonitoreringsplan, se separat lathund för information om hur du gör detta.

## 1 Gå till översikten

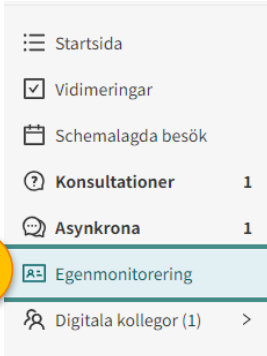


Klicka på **Egenmonitorering** i huvudmenyn.

### Får du upp ett felmeddelande?

Du behöver ha en särskild behörighet för att arbeta med egenmonitorering, kontakta din lokala administratör för att ge dig rätt behörighet.

## 2 Redigera ansvarig vårdpersonal

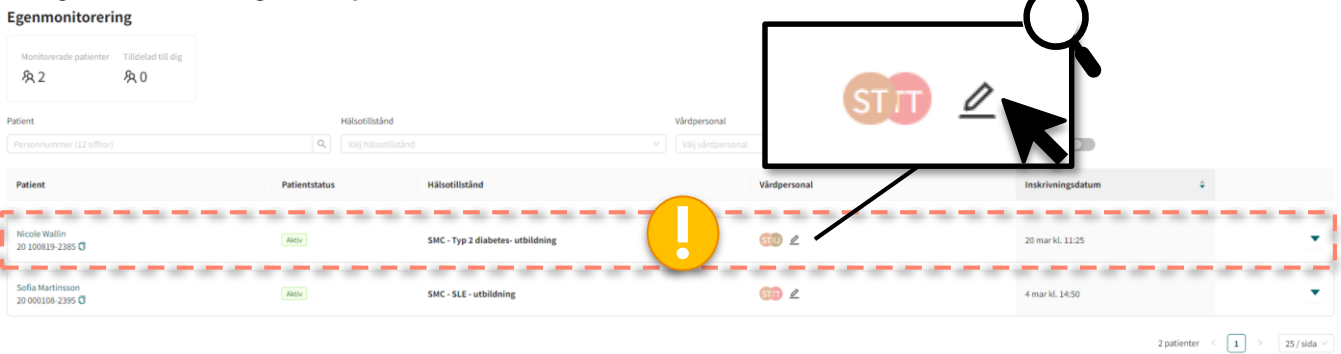

Du måste vara ansvarig för patienten vars monitoreringsplan du vill redigera. Om du behöver ändra ansvarig så gör du det direkt i översiktvyns lista. Klicka på **Penna** till höger på patientens rad i patientlistan.

Uppdatera **ansvarig sjuksköterska** genom att välja en dig själv i rullgardinsmenyn.

Klicka på **Slutför**.

## 3 Redigera monitoreringsplaner



Klicka namnet på den patient vars egenmonitoreringsplan som du vill redigera.

## 4 Notera vilka monitoreringsplaner som är aktiva

### Mätvärden

Inskrivnen i 1 egenmonitoreringsplan

Skriv in på egenmonitoreringsplan

Lägg till aktiviteter

Avsluta aktiviteter

#### Blodtryck

Inga registrerade värden

1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 8 apr

Aktiv

Aktiv

#### Välmäendeformulär

Inga registrerade värden

1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 8 apr

Du kan endast redigera aktiva monitoreringsplaner som är aktiva. Det vill säga de som har en grön ruta som det står "Aktiv" på. Avslutade monitoreringsplaner går inte att redigera, det vill säga de planer som saknar den gröna "Aktiv"-rutan.

## 5 Välj vilken plan du vill redigera

### Mätvärden

Inskrivnen i 1 egenmonitoreringsplan

Skriv in på egenmonitoreringsplan

Lägg till aktiviteter

Avsluta aktiviteter

#### Blodtryck

Inga registrerade värden

3 apr 4 apr 5 apr

Aktiv

Mätvärden / Blodtryck

Lägg till ny mätning

25 mars - 8 april 2024

Status: Aktiv

Medelvärden

Period: 25 mars - 8 april 2024

Blodtrycksmål

---/-- mmHg

Mättningsfrekvens

Redigera

Varje vecka på måndag och torsdag på morgonen

Vidimeringsprioriteringar och gränsvärden

Redigera

Vidimeringsprioriteringar

Systoliskt blodtryck

Prio 1	Prio 2	Ingen vidimering	Prio 2	Prio 1
≤ 79	80-90	91-139	140-160	≥ 161

mmHg

Klicka på grafen för den mätning som du vill redigera/radera målvärde(n) för och sedan på texten "Redigera" som du hittar på höger sida av skärmen.

Hur du redigerar skiljer sig från respektive värde, titta på resten av lathunden för att se hur du gör.

Tänk på att det är viktigt att ställa in rätt gränsvärden eftersom det minskar det antal onödiga vidimeringar du får. För många onödiga vidimeringsposter kan göra att du förlorar din vaksamhet för vidimeringar så var noga med att justera dina gränsvärden.

## Redigera målvärden

1. Klicka på texten **“Redigera”** i den sektion vars gränsvärden du vill ändra.
2. Uppdatera patientens målvärde(n) enligt önskemål.
3. Bekräfta genom att klicka på **Spara mål**.
4. För att **radera** patientens befintliga målvärde(n) Klicka på **Ta bort**, bekräfta genom att klicka på **Ja**.

## Redigera mätningsfrekvens

1. Klicka på **Redigera** under sektionen för patientens mätningsfrekvens
2. Redigera **mättningsfrekvens** för den mätning som patienten skall genomföra (4a).

Exempel 1: Upprepa **varje dag** = Mätning skall genomföras varje dag.


Exempel 2: Upprepa **varje vecka** = Mätning skall genomföras varje vecka.

Exempel 3: **Anpassad** upprepning var 2 vecka = Mätning skall genomföras varannan vecka.


Om du väljer att mätningen skall genomföras på veckobasis behöver du också välja vilken eller vilka veckodagar som patienten skall genomföra mätningen på (4b, 4c).

3. Välj **tid på dagen** (en eller flera) då patienten skall genomföra en mätning.
4. De valda inställningarna visas i klartext.
5. Klicka på **Spara ändringar**.

## Redigera gränsvärden för en av patientens mätningar

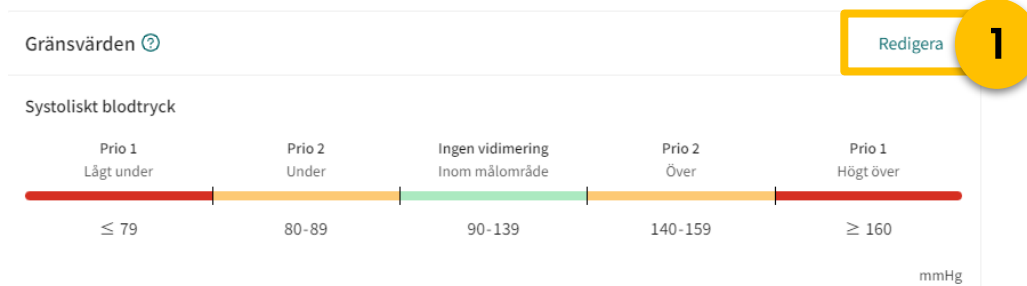

1. Klicka på **Redigera** under sektionen för patientens gränsvärden i den översiktsvy som öppnas.

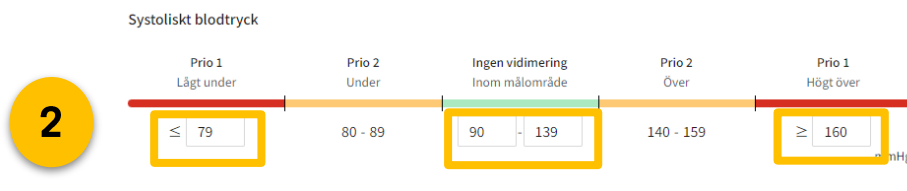

2. Om mätningen består av flera olika värden, välj vilket värde du vill redigera gränsvärden för.
3. Justera gränsvärdena enligt dina önskemål, enklast är att börja med prio 1 på båda sidor och sist justera "ingen vidimering" men det går att göra hur man vill.


Prio 1 = Ett värde inom detta intervall kommer att generera en vidimeringspost med prioritet 1.

Prio 2 = Ett värde inom detta intervall kommer att generera en vidimeringspost med prioritet 2.

Ingen vidimering = Ett värde inom detta intervall kommer inte att generera någon vidimeringspost.

4. Klicka på **Spara ändringar**.

## Återställning av patientens individuella gränsvärden till de fördefinierade standardvärdena

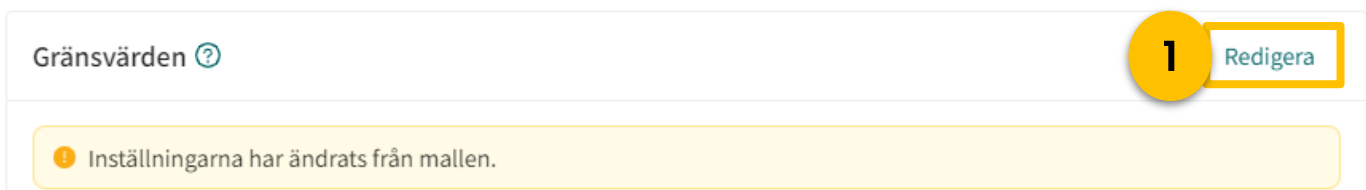

1. Klicka på "Redigera" för att komma tillbaka till samma vy där justerade dina gränsvärden



2. Klicka på "Återställ till standardvärden"
3. Bekräfta genom att klicka på "Spara ändringar"