
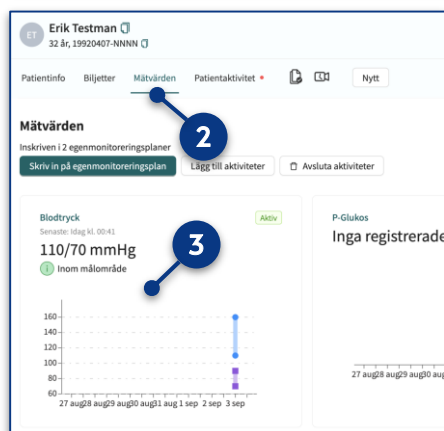
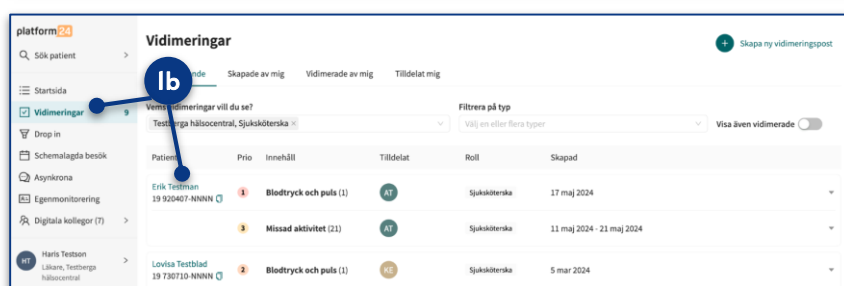


Egenmonitorering


Ändra en aktivitet i en patients aktiva egenmonitoreringsplan

Navigera till patientens profil

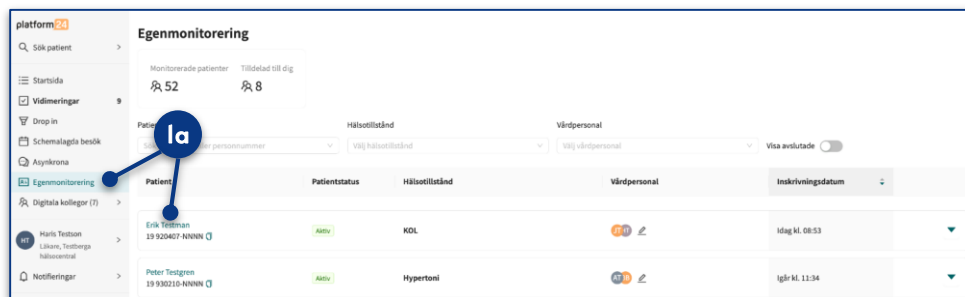

1. Gå till patientens profil. Det finns flera sätt att komma till denna profil, till exempel:
 - a. Klicka på **Egenmonitorering** i huvudmenyn. Hitta och klicka på patienten i listan över patienter som egenmonitoreras för att komma in i patientprofilen.
 - b. Klicka på **Vidimeringar** i huvudmenyn. Hitta en vidimering som är kopplad till patienten i fråga i vidimeringslistan och klicka på patientens namn för att komma in i hans profil.
 - c. Klicka på **Sök patient** i huvudmenyn. Sök fram patienten och klicka på namnet för att komma till patientens profil.
2. Klicka på **Mätvärden** i patientens profil.
3. Klicka på den aktivitet som du vill ändra för att komma in i dess översiktsvy.

Navigera till patientens profil

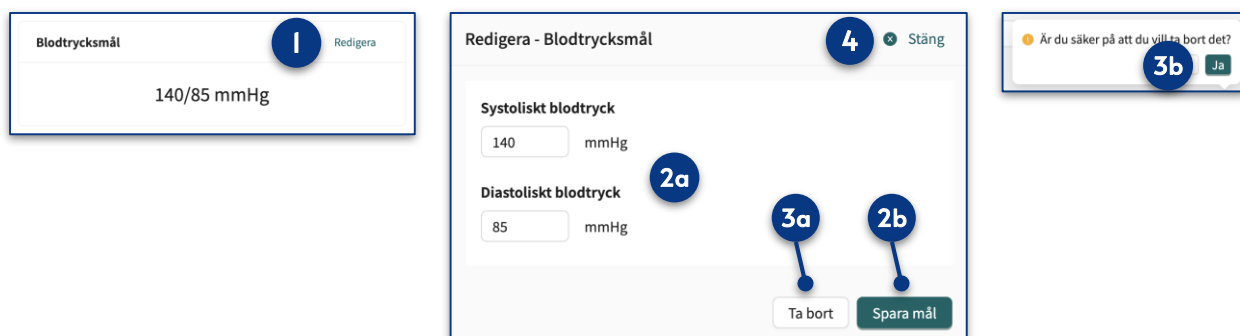

Redigera/radera målvärde(n) för aktiviteten

1. Klicka på **Redigera** under sektionen för patientens målvärde(n) i den högra delen av aktivitetens översiktsvy.
2. För att **lägga till** eller **redigera** patientens målvärde(n):
 - a. Uppdatera patientens målvärde(n) enligt önskemål.
 - b. Bekräfta genom att klicka på **Spara mål**.
3. För att **radera** patientens befintliga målvärde(n):
 - a. Klicka på **Ta bort**.
 - b. Bekräfta genom att klicka på **Ja**.
4. Klicka på **Stäng**.

Redigera gränsvärden för aktivitet

The image shows a two-step process for editing activity threshold values. On the left, the 'Redigera' button is highlighted with a blue circle '1'. The interface displays three categories: Systoliskt blodtryck, Diastoliskt blodtryck, and Puls. Each category has a horizontal scale with five priority zones: Prio 1 (Lägt under), Prio 2 (Under), Ingen vidimering (Inom målområde), Prio 2 (Över), and Prio 1 (Högt över). The current values are shown below the scale. A blue circle '2' points to the 'Prio 1 (Lägt under)' zone, and a blue circle '3' points to the 'Ingen vidimering' zone. On the right, the 'Spara ändringar' button is highlighted with a blue circle '4'. Below it, the 'Återställ till värden från mall' radio button is highlighted with a blue circle '5a', and the 'Ja' button on the confirmation dialog is highlighted with a blue circle '5b'. Finally, the 'Stäng' button at the top right of the dialog is highlighted with a blue circle '6'.

1. Klicka på **Redigera** under sektionen för patientens gränsvärden i den högra delen av aktivitetens översiktsvy.
2. Om mätningen består av flera olika värden, välj vilket värde du vill redigera gränsvärden för.
3. Justera gränsvärdena enligt dina önskemål.
Prio 1 = Ett värde inom detta intervall kommer att generera en vidimeringspost med prioritet 1.
Prio 2 = Ett värde inom detta intervall kommer att generera en vidimeringspost med prioritet 2.
Ingen vidimering = Ett värde inom detta intervall kommer inte att generera någon vidimeringspost.
4. Klicka på **Spara ändringar**.
5. Om du önskar återställa patientens individuella gränsvärden till värdena i den fördefinierade mallen för aktiviteten:
 - a. Klicka på **Återställ till värden från mall**.
 - b. Bekräfta genom att klicka på **Ja**.
6. Klicka på **Stäng**.

Redigera mätningsfrekvens för aktivitet

- Klicka på **Redigera** under sektionen för patientens mätningsfrekvens i den högra delen av aktivitetens översiktsvy.
- Redigera **mätningsfrekvens** för den mätning som patienten skall genomföra (2a).
Exempel 1: Upprepa **varje dag** = Mätning skall genomföras varje dag.
Exempel 2: Upprepa **varje vecka** = Mätning skall genomföras varje vecka.
Exempel 3: **Anpassad** upprepning var 2 vecka = Mätning skall genomföras varannan vecka.

Om du väljer att mätningen skall genomföras på veckobasis behöver du också välja vilken eller vilka veckodagar som patienten skall genomföra mätningen på (2b, 2c).
- Välj **tid på dagen** (en eller flera) då patienten skall genomföra en mätning.
- De valda inställningarna visas i klartext.
- Klicka på **Spara ändringar**.
- För att **radera** aktivitetens befintliga mätningsfrekvens:
 - Klicka på **Ta bort**.
 - Bekräfta genom att klicka på **Ja**.
- Klicka på **Stäng**.