

Användaranvisning



Anpassa innehållet

Innehållet i denna presentation är utformat för att så långt det är möjligt fungera för samtliga aktuella förvaltningar i VGR och för privata vårdgivare. Du kan behöva anpassa innehållet efter de behov som finns på din förvaltning eller verksamhet. I anteckningsfältet finns fördjupad information som du kan se som en vägledning i vad du kan berätta till bildspelet.



Taligenkänning (TIK) - tilläggsutbildning



Utbildningsinnehåll

- Autotexter
- Förankra talfokus (endast aktuellt vid taligenkänning i Obstetrix)
- Programmera diktafonens knappar
- Röstkommandon
- Steg-för-steg-kommandon

Autotexter

- En form av textmall som infogas med hjälp av ett röstkommando och används när du ofta skriver en text som alltid är densamma eller som bara ska anpassas på vissa ställen
- Kan kombineras med fält "[]" i texten. Med röstkommandon eller med knapparna på diktafonen hoppar du mellan dessa fält. Fältet markeras och du kan TIK:a in en annan text istället för det som är standard
- Vid standardtexter som ofta återkommer kan du skapa en autotext. Exempelvis "Rygg"
 - **Rygg:**
 - Lokalisation [ländrygg]
 - Smärta i [liggande]
 - Ischiassmärta [Ja]
 - Känselfall [höger underben]
 - Duration [Dagligen]
 - Debut []
 - Svårigheter att kasta vatten [Nej]


Autotexter – så navigerar du

- Lägga till autotext
Säg "Infoga <autotextens namn>"
- Hoppa mellan klamrar
Säg "Nästa fält" och "Föregående fält"
- För att få bort klamrarna – när du är nöjd med texten
Säg "acceptera standard"
- För att se listan på alla autotexter
Säg "Vad du kan säga"



Autotexter – så skapar du en autotext

Via "Hantera autotexter..." kan du lägga in din mall med standardtext
Klicka på symbolen  i DragonBar och välj "Hantera autotexter..."

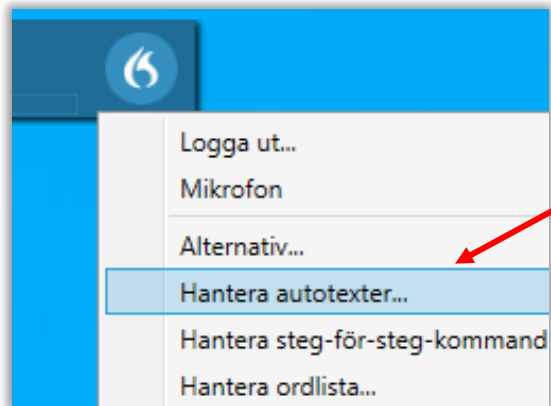

Autotexter – så skapar du en autotext (forts.)

- Klicka på "+"-tecknet för att lägga till en ny
- Varje autotext har
 - ett namn
 - en beskrivning
 - en talad form (vad vi säger för att utföra det)
 - en text (Innehåll)
- Klicka på "Tillämpa samtliga" för att spara ändringarna

The screenshot shows the 'Hantera autotexter' window. The left pane lists autotexts: ABC123, CRC BRAF, patologimall, and Testmall (selected). The right pane shows the details for 'Testmall': Namn (Testmall), Beskrivning (En enkel autotext), Talad form (Testmall), and Innehåll (En väldigt enkel autotext med ett [fält]). A red box highlights the '+' button in the left pane. Another red box highlights the 'Tillämpa samtliga' button at the bottom right. A red arrow points from the text 'Använd [...] för att skapa fält' to the 'Innehåll' text area.

Använd [...] för att skapa fält


Förankra talfokus – Endast i obstetrix

För att öppna och navigera genom andra program utan att ta bort talfokuset från målprogrammet genom att förankra talfokus

1. Öppna Dragon
2. Placera markören där du vill att texten ska skrivas
3. Tryck på Ctrl+Alt+A eller säg **fäst diktering** alternativt **fäst talfokus** för att fästa talfokuset till ditt målprogram.
Ikonen  ändras till 
4. Öppna eventuella andra program som du behöver för analys eller referens
5. Klicka på  och börja prata. Ikonen ändras till  och texten skrivs in där du fäste ditt talfokus
6. Tryck på Ctrl+Alt+A eller säg **släpp diktering** alternativt **släpp talfokus** för att avsluta förankrat talfokus


Fler användbara funktioner – programmera diktafonens knappar

För att programmera diktafonens knappar väljer du "Alternativ..." ur menyn

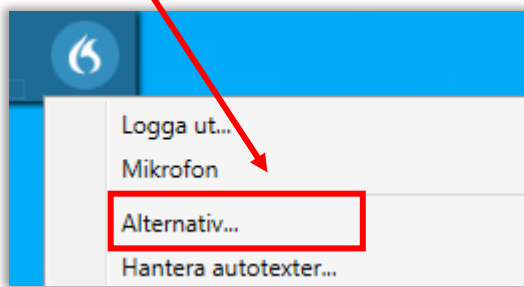


Fler användbara funktioner – programmera diktafonens knappar

Funktionerna "Nästa fält" och "Föregående fält" är till för att navigera i fälten som omnämndes i samband med autotexter – inte för att hoppa till nästa fält i journalsystemet.

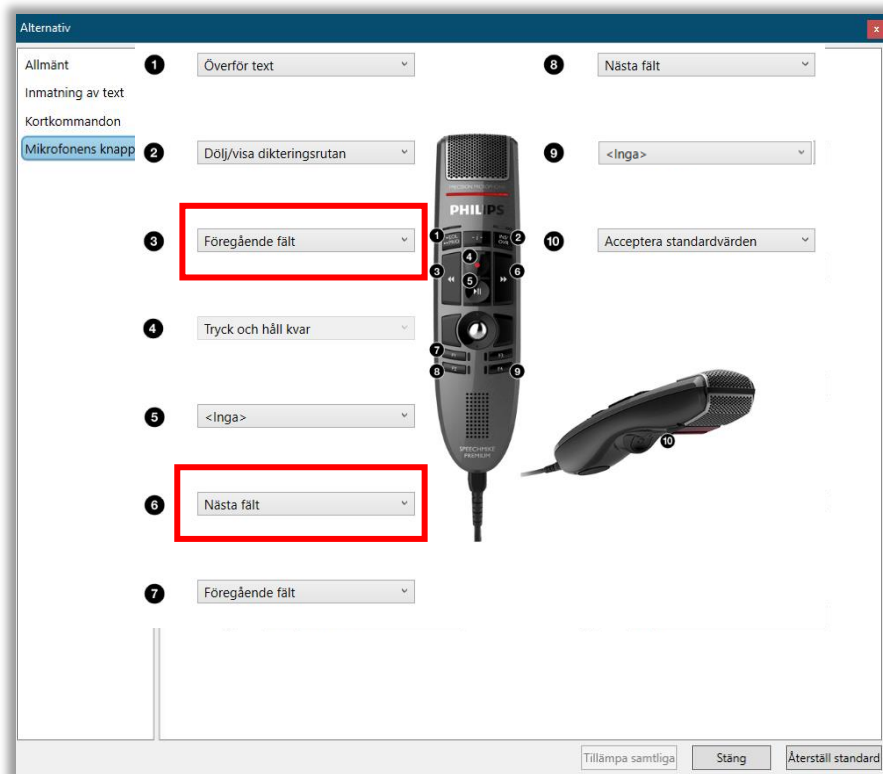

Fler användbara funktioner – programmera diktafonens knappar


Inspelningsknappen (4) är programmerad med inställningen ”Tryck och håll kvar” för att minska mängden bakgrundsljud som annars tas upp.

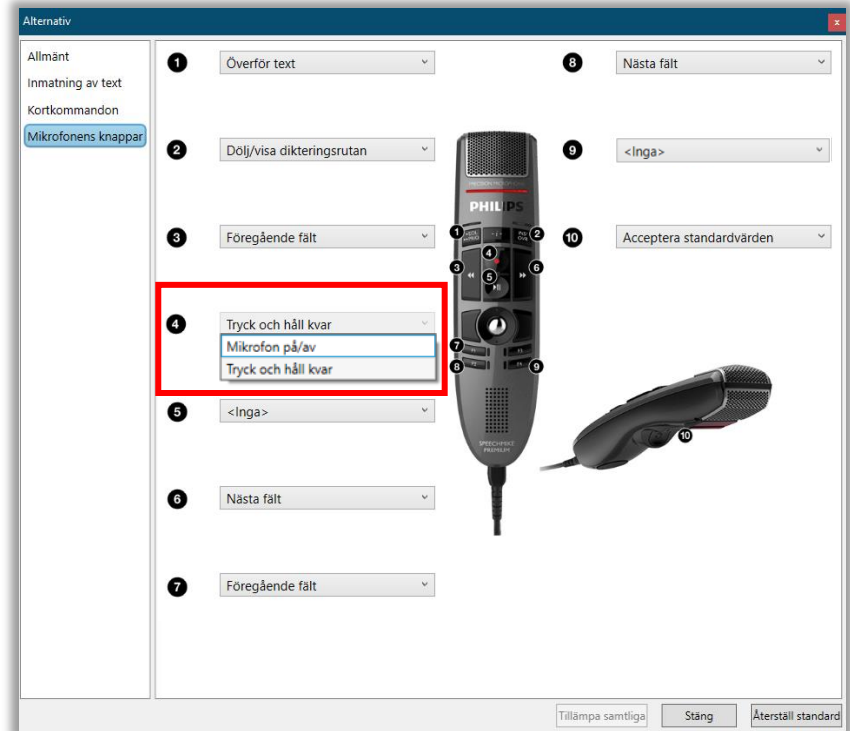

Använd rösten istället för att använda mus och tangentbord

Med steg för steg-kommandon kan du utföra åtgärder med hjälp av rösten.

- Klicka på symbolen 
 - välj **Vad du kan säga**
 - välj **Kundspecifika kommandon** (titta här innan du lägger till egna kommandon)
- Lägga in andra kommandon
 - alla kortkommandon i Melior hittar du i menyraden under **Hjälp/Melior hjälp/Snabbval i Melior**
 - alla kortkommandon i AsynjaVisph hittar du under **Hjälp**


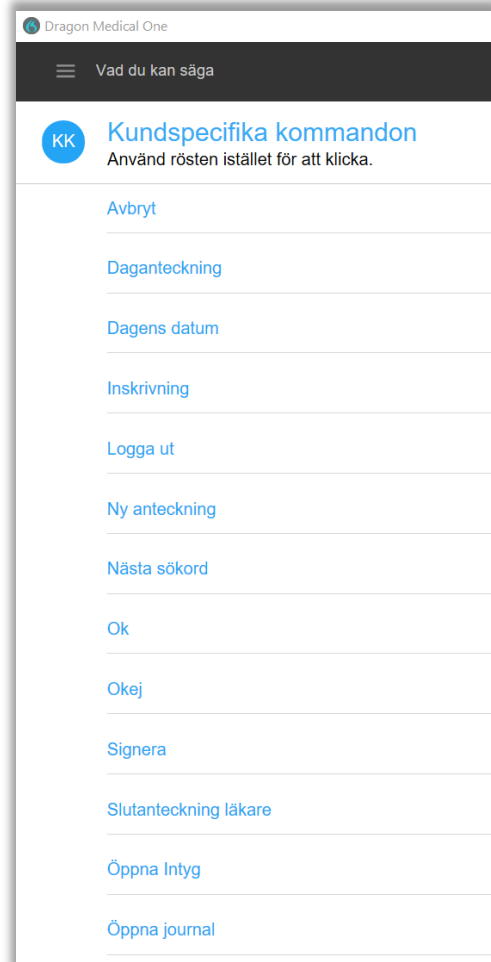


Steg för steg-kommandon

- Steg för steg-kommandon verkställer en rad åtgärder via ett enda röstkommando
- Varje kommando har
 - Ett namn
 - En beskrivning
 - En talad form (vad vi säger för att utföra det)
 - Ett eller flera steg. Varje steg väljs från en lista av möjliga steg

Tillgängliga steg för steg-kommandon

Klicka på flammen på Dragonbar för att visa dina personliga steg för steg-kommandon.

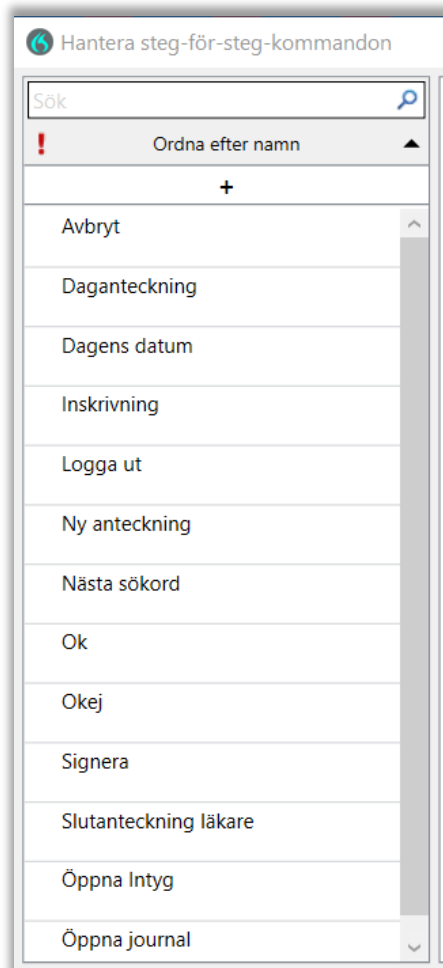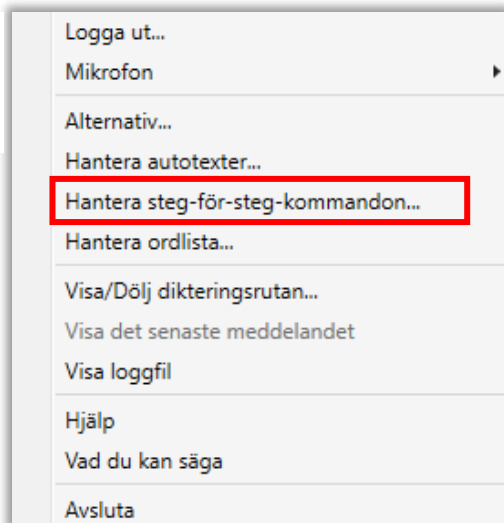

Exempel på röstkommandon Melior SU

Talad text	Funktion	Förutsättningar
Öppna journal	Kortkommando Alt+J	Fokus på patientmapp
Ny anteckning	Öppnar dialogrutan för ny anteckning	Journal öppnad
Inskrivning	Öppnar dialogrutan för ny anteckning, väljer Inskrivning, dagens datum. Anteckningen hamnar i journalen, klar att använda.	Journal öppnad
Daganteckning	Öppnar dialogrutan för ny anteckning, väljer Daganteckning. Möjlighet att ändra förvald information innan OK.	Journal öppnad
Slutanteckning läkare	Öppnar dialogrutan för ny anteckning, väljer Daganteckning. Möjlighet att ändra förvald information innan OK.	Journal öppnad
Nästa sökord	Sökord sparas och nästa sökord öppnas. Kortkommando Alt+O	Anteckning öppnad
Dagens datum	Väljer dagens datum och placerar markör i nästa sökord.	Sökord med datum är vald
OK	Kortkommando Alt+O	
Avbryt	Kortkommando Alt+A	
Signera	Kortkommando Alt+S	
Öppna Intyg	Öppnar Intygsmodulen	Fokus på patientmapp. SITHS-kort isatt.

Exempel på röstkommandon i Taligenkänning som baseras på kortkommandon i Melior. Kallas även steg-för-steg-kommandon. Just dessa finns tillgängliga för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

