

Utbildning Millennium

Favoriter i Akutliggaren

I Akutliggaren finns det mappar med Favoritordinationer. De är designade för att du ska kunna lägga vanliga ordinationer utan att gå in i journalen och söka. De är förinställda och varierar mellan olika roller.

Ordinationsfavoriter finns under kolumnerna: Läkemedel, Prover, EKG, Radiologi, Patientvård och Konsultation

Favoritordinationer	Gå till ordinationer
<input type="checkbox"/>	Patientmonitorering Rytm
<input type="checkbox"/>	Patientmonitorering Ischemi
<input type="checkbox"/>	Vitalparametrar
<input type="checkbox"/>	Blodtryck
<input type="checkbox"/>	Kroppstemperatur
<input type="checkbox"/>	Kroppsvikt
<input type="checkbox"/>	Ortostatiskt prov, patientnära
<input type="checkbox"/>	Commotiokontroller
<input type="checkbox"/>	Blåsskanning
<input type="checkbox"/>	Inläggning av urinkateter
<input type="checkbox"/>	Framdukning för suturering
<input type="checkbox"/>	Framdukning för lumbalpunktion
<input type="checkbox"/>	Framdukning för ledpunktion
<input type="checkbox"/>	Omläggning av sår
<input type="checkbox"/>	Gipsning
<input type="checkbox"/>	Anläggande av ortos
<input type="checkbox"/>	Utlämning av gånghjälpmedel
<input type="checkbox"/>	Mobilisering


Figur 1. Exempel på ordinationsmapp, Favoritordinationer och innehåll.

Personliga favoriter

Det finns också möjlighet att lägga in personliga favoriter. Initialt måste du skapa mapparna för att ordinationen ska hamna under rätt rubrik. Observera att mapparna måste namnges enligt en fastslagen standard för att hamna på rätt plats.

Skapa mappar

1. Gå in i patientens journal. Klicka på Ordinationer och Lägg till i menyn.
2. Klicka på pil vid favoritsymbolen och välj Organisera favoriter.

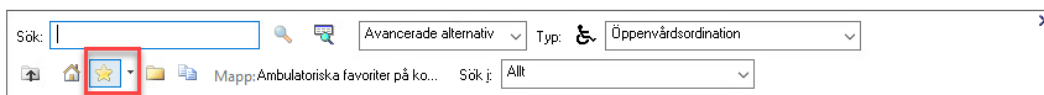

Figur 2. Favoriter symboliseras av stjärna till vänster i bild.

3. Välj Skapa mapp och namnge mappen enligt en av följande


- LaunchPoint Konsult
- LaunchPoint EKG
- LaunchPoint Labb
- LaunchPoint Läkemedel
- LaunchPoint Patientvård
- LaunchPoint Bild och funktion

4. Klicka på Stäng

Lägg till eller ta bort en ordination bland favoriter


5. Klicka på Ordinationer och Lägg till

Skriv i sökrutan och välj önskad ordination

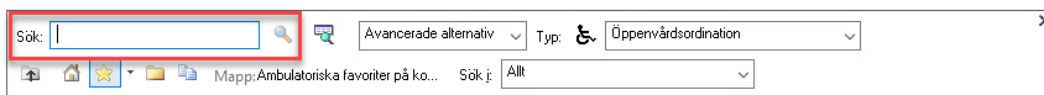

Figur 3. Sökruta ovan Favoriter.

6. Högerklicka på ordinationen
7. Välj Lägg till i Favoriter

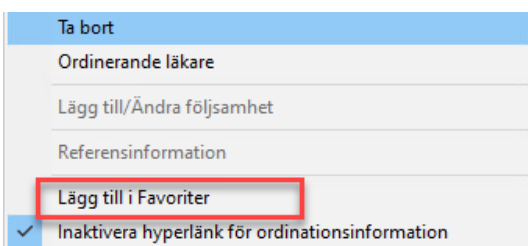

Figur 5. Ruta med Lägg till favoriter näst längst ner.

8. Välj vilken mapp du vill ha.
9. Välj OK.
10. För att ta bort en favorit, klicka på Ordinationer och Lägg till
11. Klicka på ikonen för Favoriter
12. Välj mapp

13. Högerklicka på ordinationen
14. Välj Ta bort Favoriter