


# Utbildning Millennium

## Personliga inställningar i Akutliggaren

Du kan som användare välja att justera vyer i **Akutliggaren** så att radhöjden komprimeras för att få plats med fler patienter vertikalt. Användaren kan ha olika inställningar för olika zoner.


En annan platsbesparande åtgärd är att välja att komprimera kolumnen för vitalparametrar. På det viset skapas utrymme för att se alla kolumner utan att använda sidscroll.

1. Klicka på hamburgarmenyn till höger. Välj sedan Visningsinställningar.

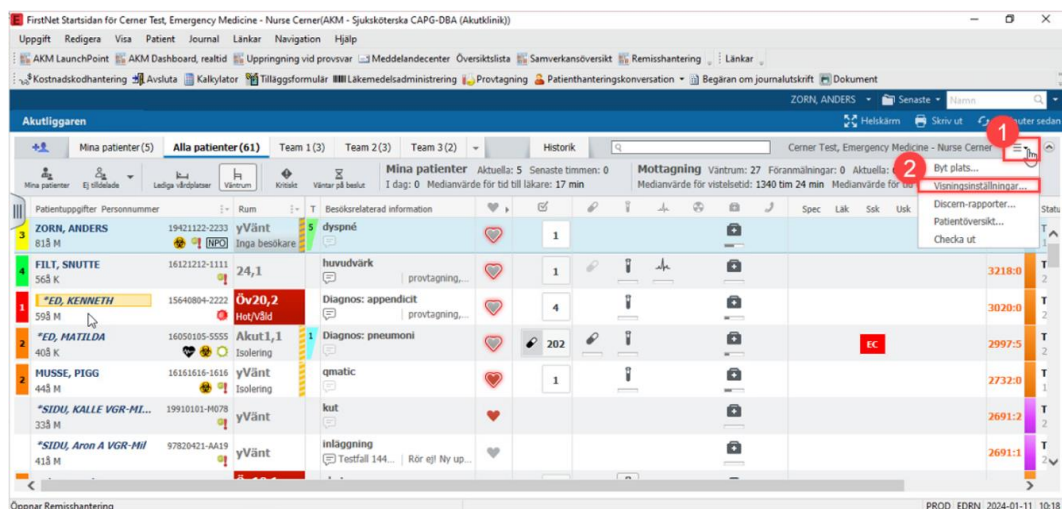


Figur 1. 1: Hamburgermenyn. 2: Visningsinställningar.

2. Fönstret Visningsinställningar öppnas. Där kan du välja vad du vill se i startvyn genom att bocka i dina preferenser. Du kan antingen välja att markera samtliga rader genom att klicka på Markera allt eller välja ut önskade rutor manuellt genom att markera dem i listan. När du är klar klickar du på Verkställ ändringarna för att spara ändringarna.

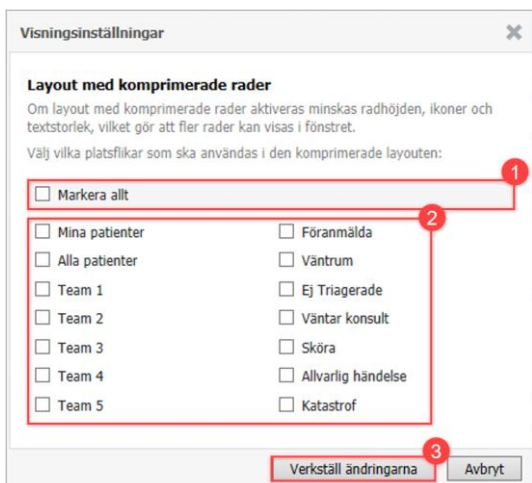

Figur 2. Fönster för Visningsinställningar. **1:** Markera allt. **2:** Markering av enskilda rader. **3:** Verkställ ändringarna.

I **Akutliggaren** finns det pilar som kan klickas på för att visa mer information. Om det finns en pil som pekar åt höger vid sidan av en symbol i en kolumn betyder det att det finns mer information att se.

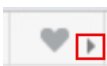

Figur 3. Pil som indikerar att det finns mer information att se.

- Klicka på pilen för att öppna fler kolumner. Nu öppnas fler kolumner och pilen du klickade på blir en pil som pekar åt vänster. Klicka på vänsterpilen för att gömma kolumnerna igen.

Patientuppgifter	Personnummer	Rum	T	Besökrelaterad information	BVS	AF	SPO2	HF	BT	Temp	ACVPJ	Tillsyn	
ZORN, ANDERS	19421122-2233	yVänt	5	dyspné	18	98	88	120/75	36,3	A-Alert...	Placerad...		1
FILT, SNUTTE	16121212-1111	24,1		huvudvärk	0	16	98	72	120/75	36,7	A-Alert...		1
*ED, KENNETH	15640804-2222	Öv20,2		Diagnos: appendicit				125/80					4
*ED, MATILDA	16050105-5555	Akut1,1		Diagnos: pneumoni	0	Klar	98	120/70					202
MUSSE, PIGG	16161616-1616	yVänt	1	omatic	9	14	190	65	140/90	35,7	V-Reape...		1
*SIDU, KALLE VGR-MI...	19910101-0678	yVänt		kut	3	25	185	120	170/50	37	A-Alert...		
*SIDU, Aron A VGR-Mil	97820421-AA19	yVänt		inläggning	6	13	95	99	110/75	38,0	A-Alert...		

Figur 4. Vy när fler kolumner är öppnade. **1:** Ytterligare kolumner. **2:** Vänsterpil för att dölja kolumnerna.