

Gäller för: VO4 Akutsjukvård

Innehållsansvar: Hans Törnqvist, (hanto1), Ambulanssjuksköterska

Granskad av: Joel Wallén, (joewa1), Överläkare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-15

Giltig till: 2027-11-18

# Hudlim – Derma + flex

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

## Bakgrund, syfte och mål

Vid mindre ytliga okomplicerade sår, prehospitalt fästa ihop sårkanterna när patienten inte har övriga skador som behöver omhändertas inom sjukvården.

## Information

Hudlim är ett alternativ till suturer. Det är inte lika starkt som suturer men ger finare ärr. Hudlimmet Derma + flex är trögflytande för att inte rinna in i såret eller rinna iväg. Limmet varar i upp till 10 dagar och nöts successivt bort under tiden. Limmet är vattentätt men patienten ska undvika hudprodukter, tvål och att skrubba på sårytan för att inte nöta bort limmet.



## Indikationer

Ytliga sår som inte går ner i underhuden. Typiskt används hudlim på sår upp till cirka 3–4 cm.

## Kontraindikationer

- Avstå sårområden med mycket rörelse eller drag, tex knogar, armbågar.
- Avstå stora sår, eller sår som glipar mycket.
- Avstå sår där det är svårt att få ihop sårkanterna.
- Avstå om såret är på ett ställe där det kosmetiska resultatet är viktigt för patienten, som tex i ansiktet, då ska man vara frikostig med att hänvisa patienten till läkare för bedömning.


## Försiktighet

Positionera patienten så att lim inte kan rinna ner i ögon, mun etc.

## Instruktion:

1. Tvätta och torka såret.
2. Håll spetsen uppåt och skruva på tuben på applikatorn (bild 2).
3. Håll tuben i sidoläge och tryck på tuben precis innan du ska limma (bild 3). Du ser när limmet kommer till skumgummi-spetsen. Limmet är svagt lila.
- Håll ihop såret och applicera ett tunt lager lim på sårområdet (bild 4). Limmet ska inte in i såret, utan appliceras ovanpå såret. Om limmet är lila på huden är lagret för tjockt och stelnar långsammare.
4. Håll ihop sårkanterna i ca 60 sekunder för att limmet ska stelna (bild 5).
5. Släng tuben.
6. Informera patienten att limmet skall vara kvar i 10 dagar och undvika ökat nötning av limmet, se punkt 2.1 ovan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

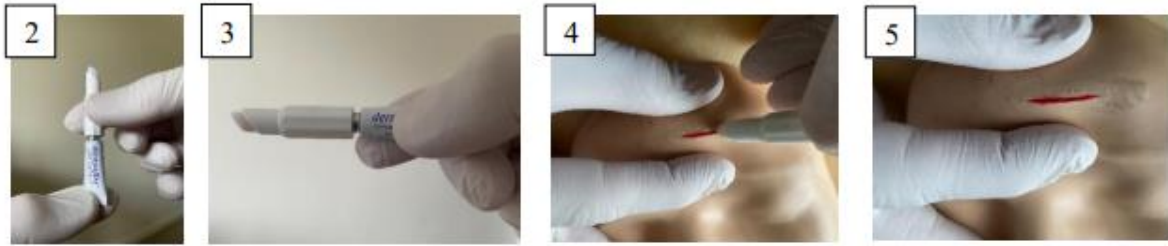

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO4 Akutsjukvård

**Innehållsansvar:** Hans Törnqvist, (hanto1),  
Ambulanssjuksköterska

**Granskad av:** Joel Wallén, (joewa1), Överläkare

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9678-1600500551-95

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-04-15

**Giltig till:** 2027-11-18