

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-09-22

Innehållsansvar: Anton Edvardsson, (anted1), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2027-04-14

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Nästamponad Rapid Rhino

## Innehållsansvariga:

Andreas Thorén, överläkare, IVA SkaS Skövde

Anton Edvardsson, IVA-sjuksköterska, IVA SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund och syfte

Detta styrdokument riktar sig till sjuksköterskor samt läkare på intensivvårdsavdelningen på Skövde sjukhus.



Rapid Rhino (RR) är en nästamponad som kan användas för främre näsblödningar som kräver åtgärder utöver yttre tryck.

RR består av en avlång uppblåsbar ballong som täcks av ett lager carboxycellulosa som förutom att det underlättar appliceringen samt avlägsnandet även gynnar trombocyttaggregation. Den uppblåsbara ballongen styrs utifrån en luventil med cuffballong.

## Kontraindikationer

Rapid Rhino nästamonad bör ej användas utan godkännande från öron-näsa- och halsläkare om patienten har ansiktstrauma.

## Utförande


### Arbetsbeskrivning

RR 5.5 cm finns i akutvagnens nedersta låda. Förutom en RR behövs även:


- Sterilt vatten
- 20 ml spruta med luerfattning
- Xylocainspray 100mg/ml kutan lösning (flergångsförpackning) samt ett KORT sprayrör (engångs)




1. Avlägsna den blå skyddshylsan och sänk ner RR i **STERILT VATTEN** i minst 30 sekunder. Använd ej koksaltlösning. Därefter bör RR användas snarast då den kan bli sladdrig om man väntar för länge.

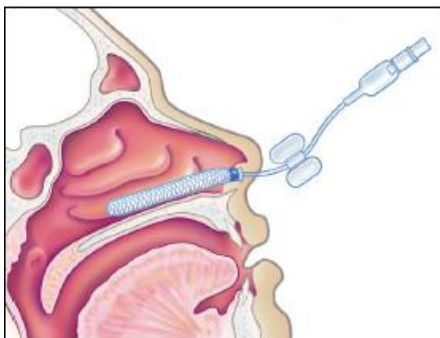

2. Om möjligt och om patienten kan medverka bör man be patienten snyta ur näsan först. Om patienten ej kan medverka kan man försöka suga rent för att underlätta appliceringen. Bedöva vid behov med Xylocainspray 100mg/ml kutan lösning 2-10 sprayningar. För därefter in RR parallellt med näsgolvet, vinkla ej RR uppåt vid applicering. För in RR tills den blå plastringen döljs.

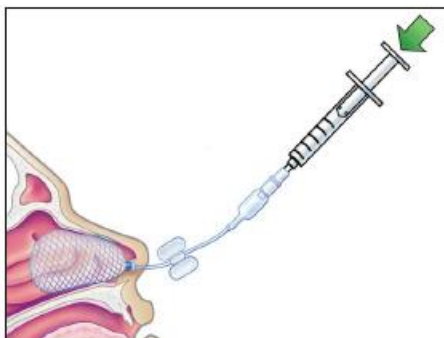

3. Blås långsamt upp RR med en 20 ml spruta (luft). Målet är att RR skall applicera ett lagom tryck mot blödningsen. Den faktiska volymen som krävs för detta varierar från person till person så man får gå på hur "pilot kuffen" utanför näsan känns. Målet är att kuffen skall vara fast men inte hård.

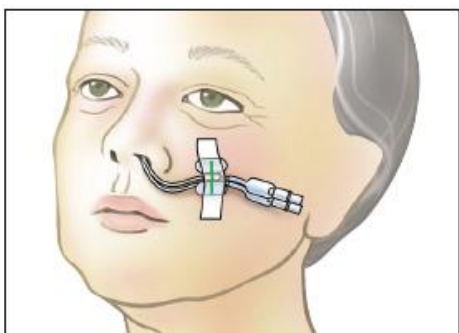

4. Fäst sedan upp luerventilen och cuffblåsan med tejp enligt bild.

### **Avlägsnande**

RR bör avlägsnas av i samråd med öron- näsa- och halsläkare.

## **Källförteckning**

Smith & Nephew. Rapid Rhino [Internet] USA: 2021. [Citerad 2022 Jan 28].

Tillgänglig från:

<https://rapidrhino.com/rapid-rhino-product-usage-instructions/>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Anton Edvardsson, (anted1),  
Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9696-242963441-162

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-09-22

**Giltig till:** 2027-04-14