

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-23

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-05-02

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Skalle, ansikte 3D huvudplastik 808L - datortomografi

Förändringar sedan föregående version
Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Metodbeskrivning datortomografiundersökning skalle/ansikte 3D huvudplastik 808L.

Metodmall

Us kod

808014 DT skalle, ansikte 3D plastikkirurgi (lågdos).

Indikation

Kartläggning av suturer och skullform. Inför och efter plastikoperation av huvud

Serieöversikt

1. Scout.
2. Skalle, ansikte från hakspets till yttre hudkonturer på skallen.

Förberedelser

ID kontroll skall utföras på undersökningsrum.

Patientpositionering

Head first /supine.

Patientcentrering

Centrera OM.

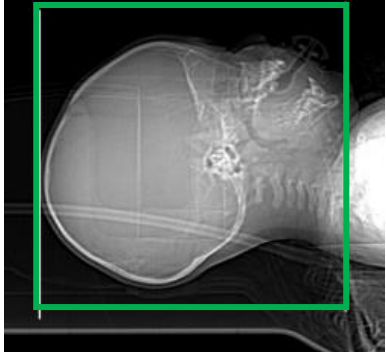
Kontrastmedel

Ingen.

Scout

Lateral .

Scanområde/kriterier

Serie 1. Nativ serie
Scanområde från hakspetsen till yttre hudkonturen på skallen (viktigt att hela skallbenet är med)


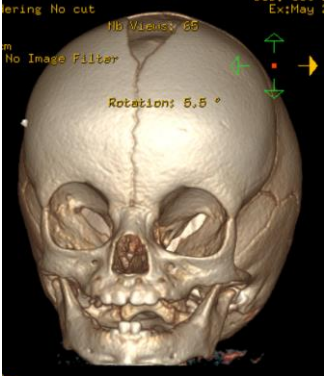

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Rekonstruktioner

Serie	Recon nr		Snittjocklek/ intervall	Algoritm	Fönstersättning	Arkivering
1. Skalle/ ansikte bone	1		0,6/0,6	Bone	WW2500/WL500	BFR/AW server
Skalle ansikte TS TF	2	copy	0,6/0.6	Standard TF	WW400/WL 40	BFR/AW server

Reformateringar

		Projektion 1. VRT	Inställning Rotation 32 bilder höger till vänster
		2. VRT	Rotation 32 bilder anteriort till posteriot

Serie	Auto/man	MPR	Snittjocklek/intervall	Algoritm	Arkivering
VRT Skalle /Ansikte recon 2	Via volume viewer	VRT	32 bilder R-L	Standard	PACS
VRT Skalle /Ansikte recon 2	Via volume viewer	VRT	32 bilder H-F	Standard	PACS

Hängningsprotokoll

Layout 1.

1. VRT R-L	2. VRT H-F	5.Scout	6. Dosrapport.
3. Skalle/ansikte std TS	4. Skalle/ ansikte bone TS		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-305

Version: 5.0

Giltig från: 2026-02-23

Giltig till: 2028-05-02