

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-03

Innehållsansvar: Petronella Jeppsson, (petje2), Systemadministratör

Giltig till: 2028-05-20

Granskad av: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Ta bort undersökning i Sectra RIS och IDS7 - BFM

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Bakgrund och syfte


Arbetsbeskrivning hur man tar bort undersökning på remiss i RIS och IDS7.

Utförande

Man kan ta bort undersökning både i RIS och IDS7 (PACS) men man kan aldrig ta bort den sista undersökningen på remissen. Remisser kan bara makuleras av systemadministratör.

I Sectra RIS

Gå in på remissen, i rutan Valda undersökningar och högerklicka på undersökningen som ska tas bort från remissen. Välj Ta bort undersökning.

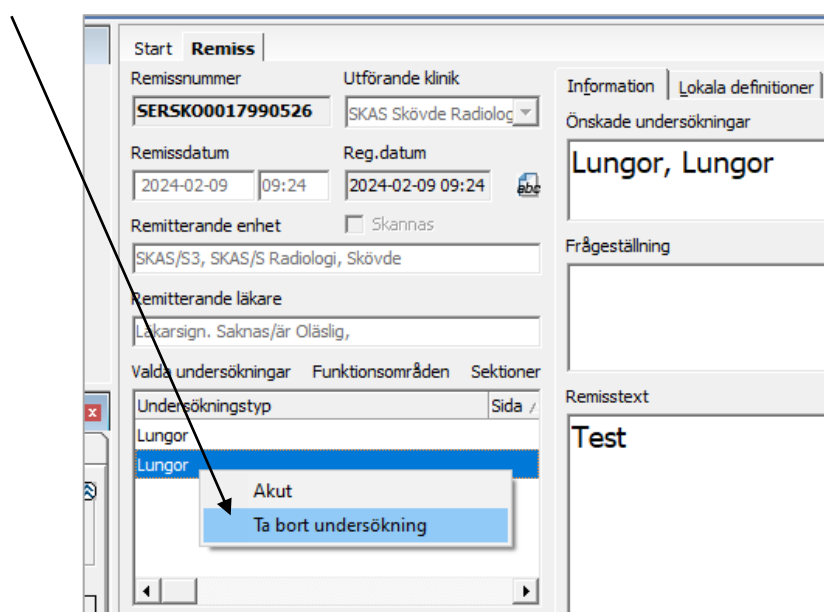



I Sectra IDS7

Man kan ta bort undersökningar i både undersökningsfönstret och informationsfönstret.

För att ta bort undersökning i IDS7 (PACS) måste undersökningen ha status Registrerad. Om undersökningen är prioriterad måste prioriteringen tas bort före man kan ta bort undersökningen.



Ta bort prioritering

- Stå i prioriteringsvyn
- Se till att enbart ha undersökningen som ska tas bort markerad (bocka ur de vita små breven på de andra undersökningarna)
- Tryck på krysset med prioriteringen, därefter Ta bort

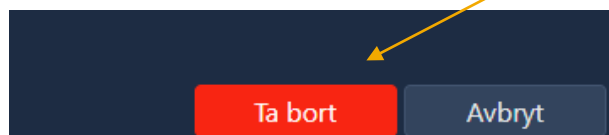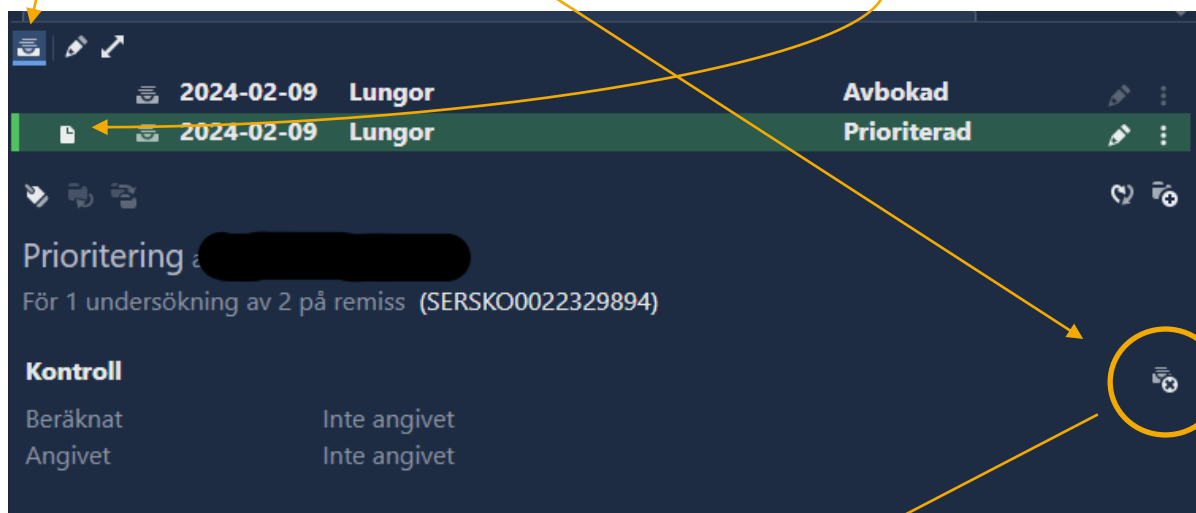


Ta bort undersökning i informationsfönstret

- Stå i prioriteringsvyn
- Stå på undersökningen som ska behållas
- Tryck på de tre prickarna på undersökningen som skall tas bort
- Tryck på Ta bort

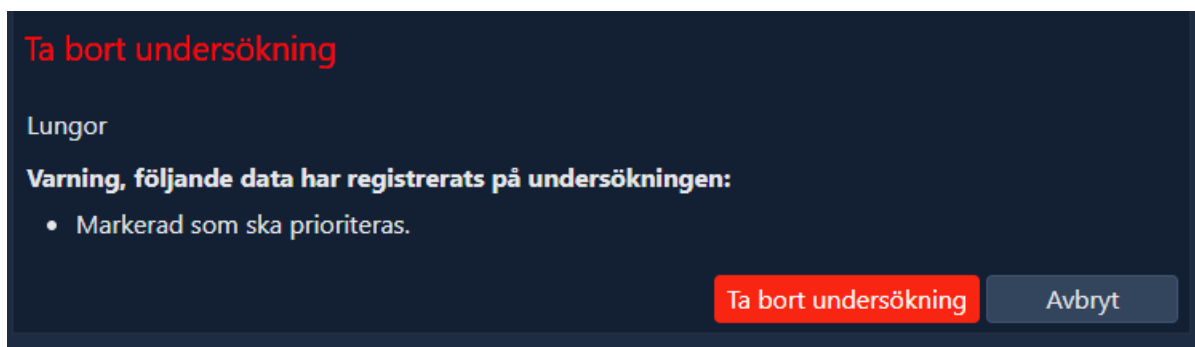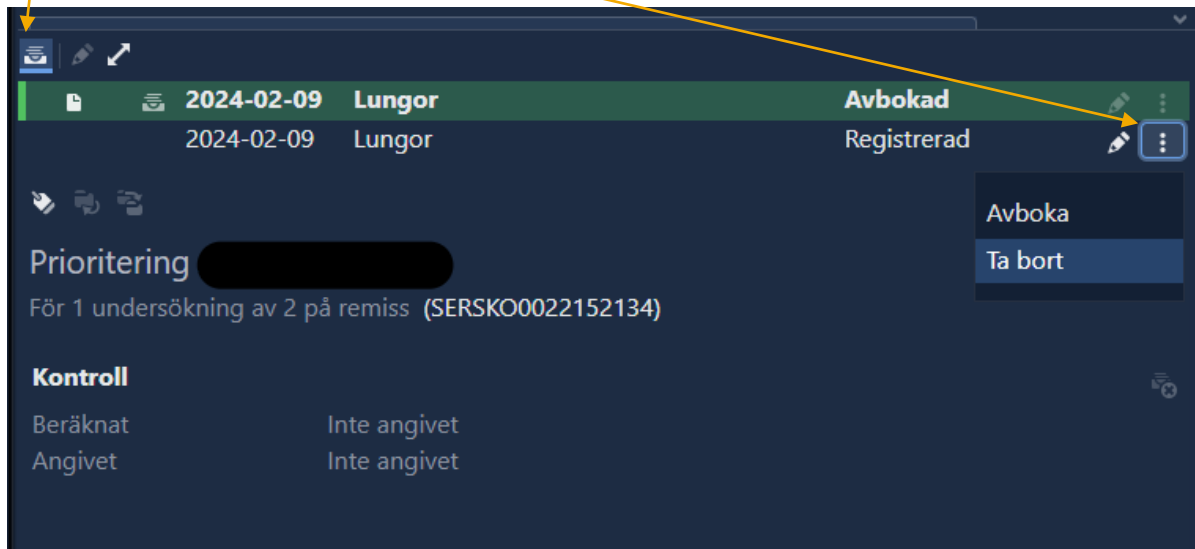

Ta bort undersökning i undersökningsfönstret

- Stå på den undersökning som ska behållas
- Tryck på krysset som kommer upp till höger om status på den undersökning som ska tas bort

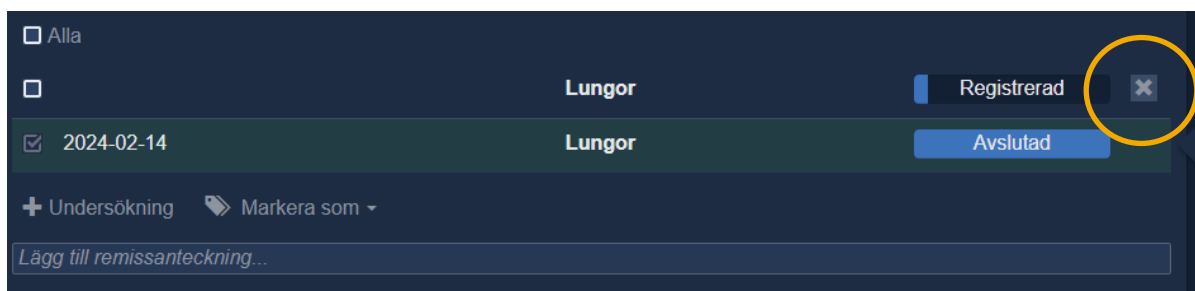

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Petronella Jeppsson, (petje2),
Systemadministratör

Granskad av: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-583

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-03

Giltig till: 2028-05-20