

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-06-02

Innehållsansvar: Katarina Haglund, (katos), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-05-27

Granskad av: Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

55A Cervix – magnetkameraundersökning

Syfte

Metodbeskrivning av MR Cervix 55A.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Arbetsbeskrivning

Us kod/Us namn

55A Cervix

Undersökningstid

35 min.

Indikation

Cervixcancer.

Förberedelser

Fasta 4 timmar.

Självpapplicering av microlax 2 timmar innan undersökning.

Patienten ska tömma blåsan **1 timme före** undersökningen.

[Frågeformulär inför magnetkameraundersökning](#) (MR), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patienten ska bära MR-säkra kläder vid undersökningen.

PVK eller annan fungerande infart.

System

3T i första hand om protes 1,5T.

Patientpositionering

Ryggläge, fötterna först. Låga knäkudden och armstöd. För att minska andningsartefakter använd ett band över magen som komprimerar buken.

Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering


Centrera laserljuset strax nedom crista.

Spole

Integrerad ryggspole och anterior coil.

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snittplan	Snitt tjocklek	Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier)
BUSCOPAN			
SURVEY			
T2W TSE	SAG	3-4MM /0.3MM	
T2W TSE	TRA	5MM /0.5MM	Vinkla efter bäckenbotten, promontorium till symfysen
T2W TSE	COR	3-4MM /0.3MM	Vinklas efter cervixkanalen
T2W TSE	TRAO	2.5-4MM /0.3MM	Vinklas efter cervixkanalen
DWI 3b SPIR	TRAO	4-5MM /0.4MM	Som ovan

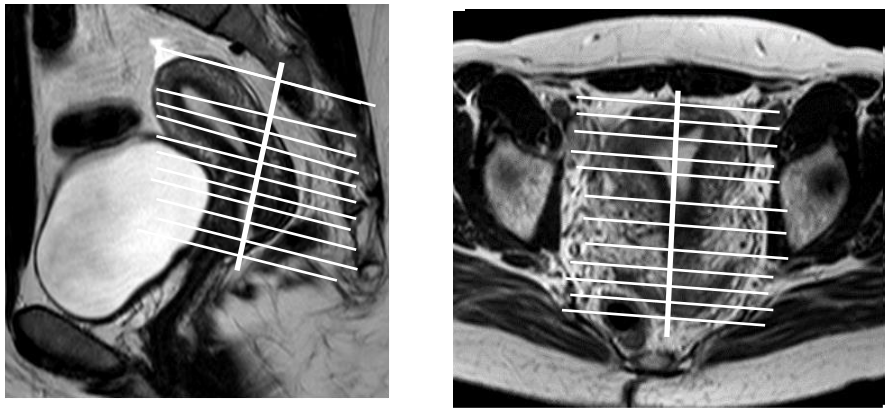

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Administrerade läkemedel antecknas i sectra-PACS.

MR-säkerhet

Rutin för MR-säkerhet följs enligt [säkerhet vid magnetkamera](#) och [Implantat och främmande material MR-patient](#) eller ring fysiker 0510-85534.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Katarina Haglund, (katos),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-659

Version: 1.0

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-05-27