

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-11

Innehållsansvar: Katarina Haglund, (katos), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-03-11

Granskad av: Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

66A Handled FX - magnetkameraundersökning

Syfte

Metodbeskrivning av MR Handled FX 66A.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Arbetsbeskrivning

Us kod/Us namn

66A Handled FX.

Undersökningstid

20 min.

Indikation

Fraktur.

Förberedelser

[Frågeformulär inför magnetkameraundersökning](#) (MR), och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

Patienten ska bära MR-säkra kläder vid undersökningen.

System

3T eller 1,5 T

Patientpositionering

Fötterna först, ryggläge. Aktuell handled läggs i extremitetsspolen med tummen uppåt, som en rak handledsida. Viktigt att handleden är i mitten i spolen. Använd småkuddar till att fixera och en sandsäck på spolen. Hörselskydd och larmknapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering



Centrera mitt över handleden.

Spole

Extremitetsspole alt. Flexspolar.

Sekvenser/kriterier

Sekvens	Snittplan	Snittjocklek	Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier)
SURVEY			
STIR	COR	3MM /0.3MM	Parallellt med underarmens ben. Täck in alla mjukdelar
T1W TSE	TRA	3MM /0.3MM	Vinkelrät mot ovan från basen MC1 till 5 cm proximalt om radius ledyta.
T1W TSE	COR	3MM /0.3MM	Som STIR.

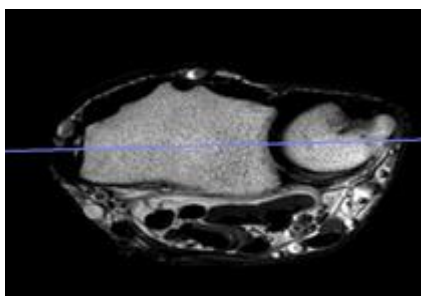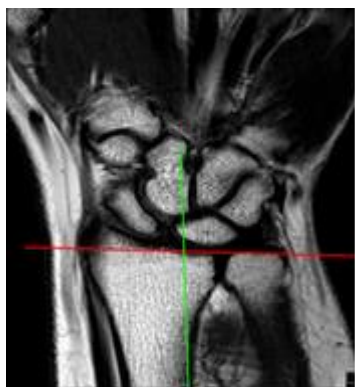

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

MR-säkerhet

Rutin för MR-säkerhet följs enligt [säkerhet vid magnetkamera](#) och [Implantat och främmande material MR-patient](#) eller ring fysiker 0510-85534.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Katarina Haglund, (katos),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-718

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-11

Giltig till: 2028-03-11