

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-11-25

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-12

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Bäckenmätning 854P- Datortomografi

## Syfte

Metodbeskrivning av utförande av datortomografiundersökning

Bäckenmätning utan iv kontrast 854P.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderat styrdokument med ny mall

## Metodmall

Us kod/Us namn

854 000 Dt Bäckenmätning

## Indikation

Mäta bäckenmått inför förlossning

## Serieöversikt

Scout	Frontal
Serie 1.	1. Bäcken utan kontrast

## Förberedelser

1. Id kontroll skall utföras på undersökningsrummet.

## Patientpositionering

Ryggläge/Fötterna först. Bilderna tas när patienten andas in och håller andan. Mycket viktigt att patienten är rätt centrerad i gantry för rätt mätvärden, samt att patienten ligger plant.

## Patientcentrering

IC/ Höftkammen

## Kontrastmedel

Ingen

## DFOV

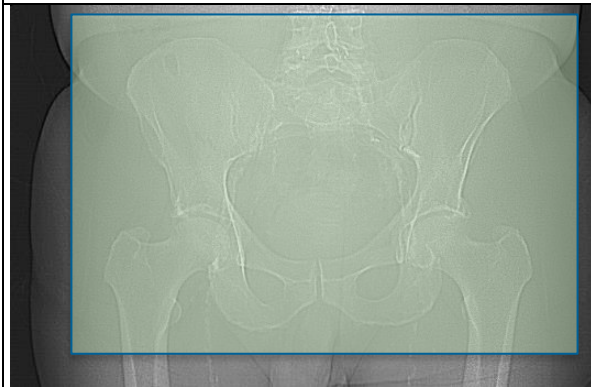
Planera efter patienten

## Scout

Frontal

## Scanområde/kriterier

**Bäcken** Serie 1. Hela bäckenet ska avbildas från L5 ovan höftkammen till och med 10mm nedanför tuber ischiadicum



## Dokumentation

Dokumentera i RIS enligt rutin. Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

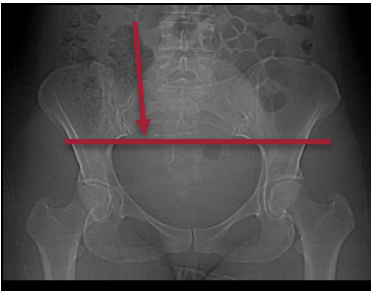
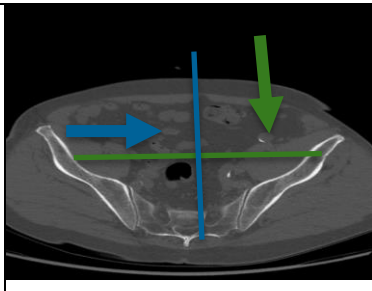
## Strålskydd

Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.

## Rekonstruktioner

Serie	Recon nr		Snittjocklek/ intervall	Algoritm	Fönstersättning	Arkivering
Scout						PACS
1. Bäckénmätning TS	1		0,6/0,6	bone	2500/500	PACS/AW server
* MAR Bäckénmätning TS	3	Vb.	0,6/0,6	bone	2500/500	PACS/AW server
Dosrapport						PACS

## Reformateringar

		Projektion Ax 10/3mm  Cor 10/3mm  Sag 10/3mm Sag 20/5 mm	Görs med automatik
--	--	--	-----------------------

Serie 1.	Auto/ Man	MPR	Snittjocklek / Intervall	Fönstersättning	Algoritm	Arkivering
1. Bäckénmätning TS	auto	Ax	10/3mm	2500/500	Bone	PACS
	auto	cor	10/3mm	2500/500	Bone	PACS
	auto	sag	10/3mm	2500/500	Bone	PACS
	auto	sag	20/5mm	2500/500	Bone	PACS

## Hängningsprotokoll

Ax	Cor	Scout	Dosrapport
Sag	Sag		

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Eva Högström, (evaho5),  
Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-84

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-11-25

**Giltig till:** 2028-01-12