

Bilder sträckbord (antegrad femurspik, DHS, LIH)




Ta bort "rumpkudden" på respektive sida innan ni flyttar patienten på op-bordet.





Värme under
överkroppen

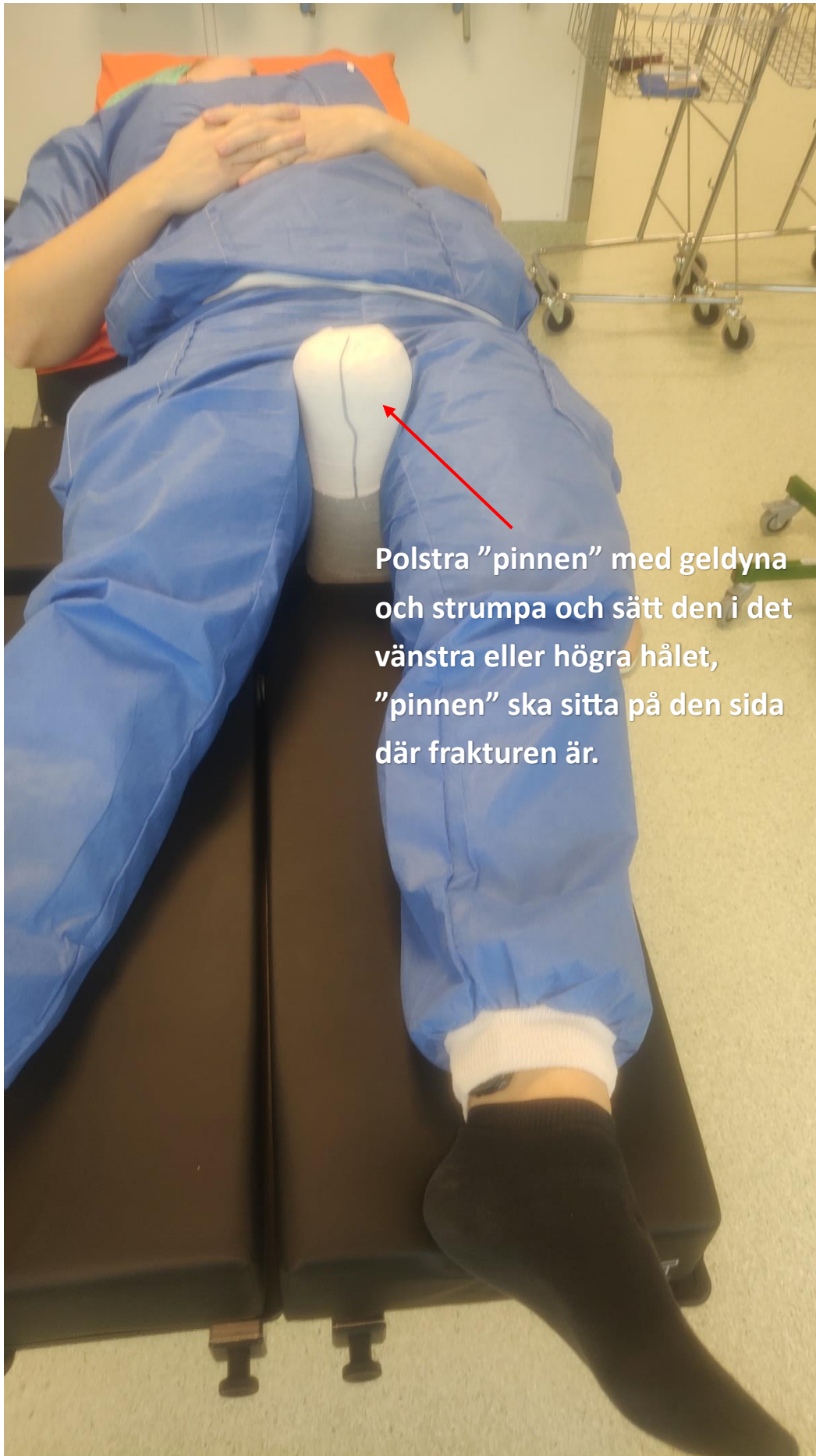

Polstra "pinnen" med geldyna och strumpa och sätt den i det vänstra eller högra hålet, "pinnen" ska sitta på den sida där frakturen är.



Flytta patienten ner mot "pinnen" så långt det går, "pinnen" fungerar som mothåll när man extenderar patienten. Se till att patienten ligger "bananformat" på bordet.




Sidostöd i
axelhöjd



Montera sträckanordningen på armen

Skruva ut extensionen mot patienten innan du sätter fast stöveln med patientens ben så att det finns marginal för att extendera patientens ben.

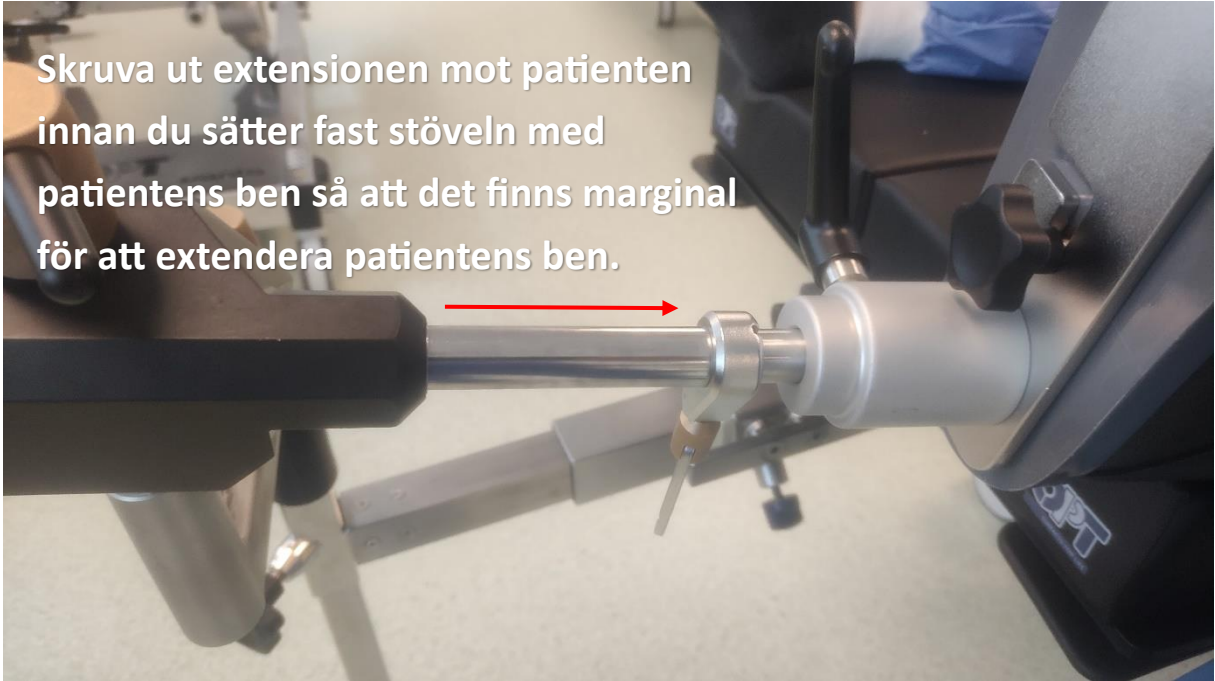


Förbered stöveln, välj rätt storlek efter patientens fot.



Sätt på stöveln på patientens fot. Spänn åt ankelremmen först. Hälen måste sitta rätt ner i stöveln.



Öppna skruv 1 och 2 så att sträckanordningen är lätt rörlig. Snurra på ratten så att staven åker ut i pilriktningen.

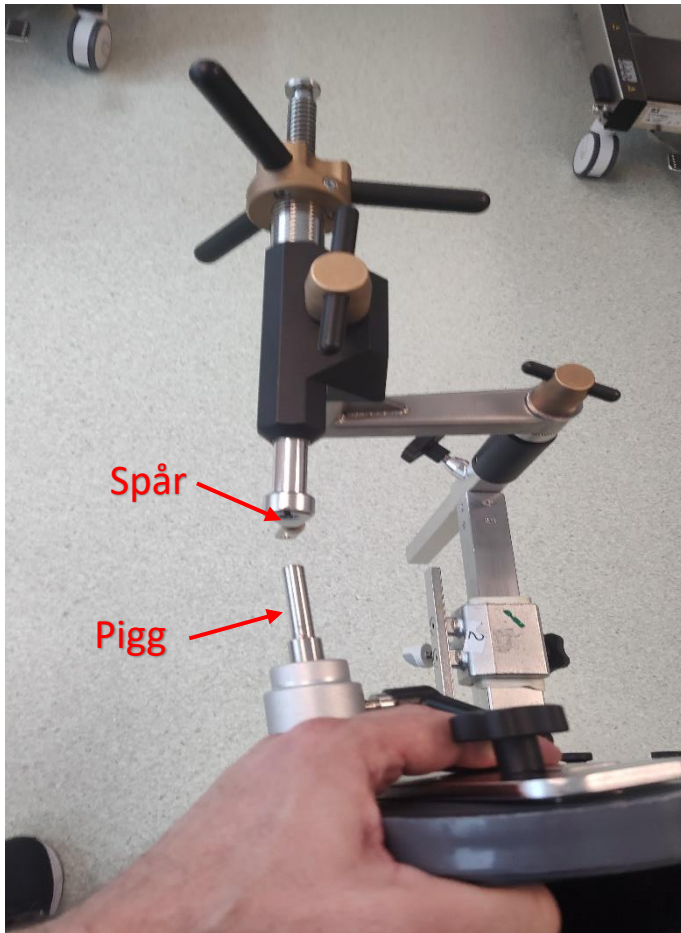

Sätt i stöveln med patientens ben i sträckanordningen. Se till att piggen på stöveln hamnar i spåret på staven.




När patientens ben sitter fast i sträckanordningen kan den ena fotplattan tas bort. Dra i knappen och ta bort fotplattan.



Montera klossen för
benstödet på den "friska"
sidan.

Dra på engångsstrumpa
på benet

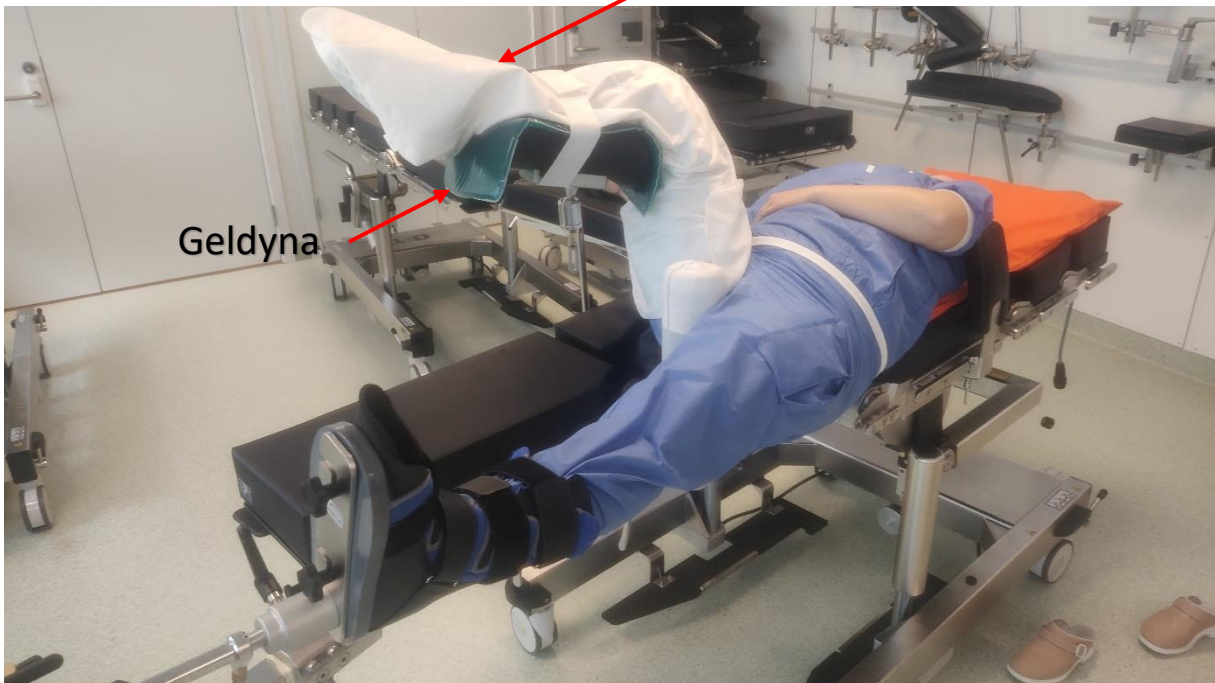


Geldyna

Det friska benet ska placeras i benstödet. Benet och benstöd får inte roteras utåt, utan ska vara parallellt med det frakturerade benet.



Glöm inte bälte

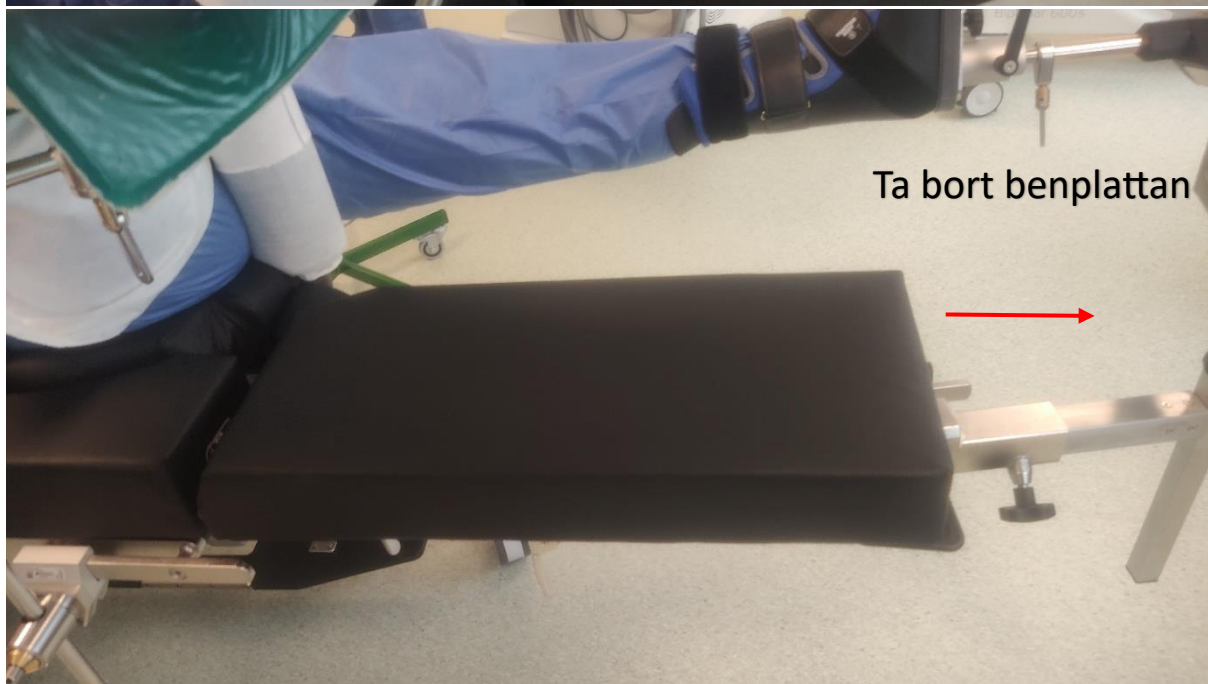

Ta bort benplattan



Montera klossen för
draperingspinnen på
armen.