



Så här använder du Lite, Actif eller SRC irrigationssystem

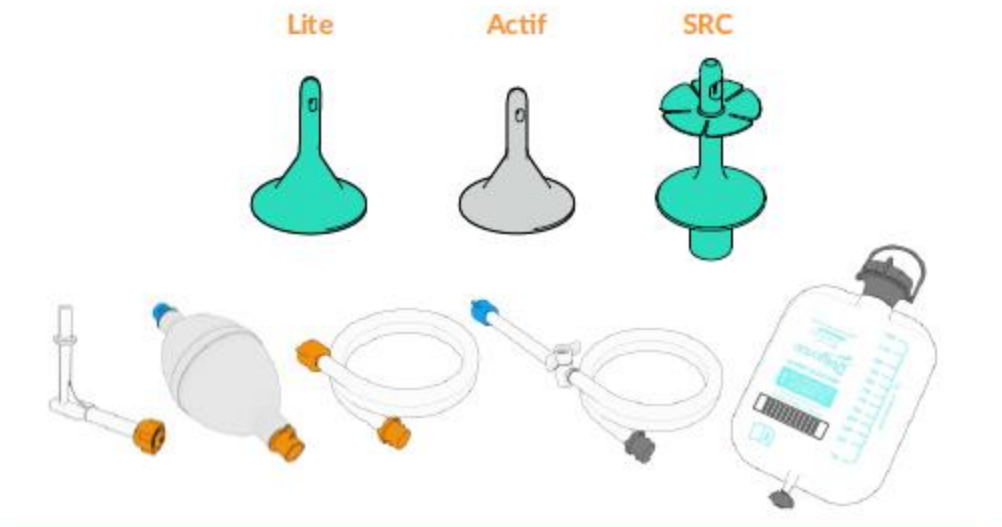


Tvätta händerna noggrant innan du börjar.

Montera produkten enligt bilden, matcha de färgade kopplingarna och vinkelkopplingen.

Tryck och vrid ordentligt på konan på vinkelkopplingen.

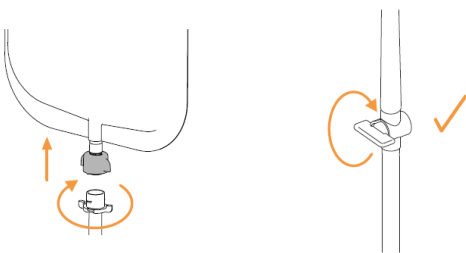


Innan du startar fäst slangen till vattenpåsen och stäng kranen - se till att kranen är placerad vinkelrätt mot slangen.

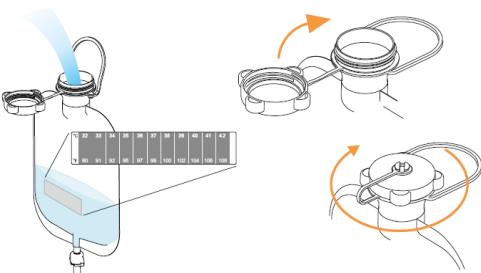


Skruva loss locket på vattenpåsen och fyll på vatten som är mellan 35 och 37 grader.

Vik påsen vid vattenlinjen för att ta bort eventuell luft, innan du stänger locket.

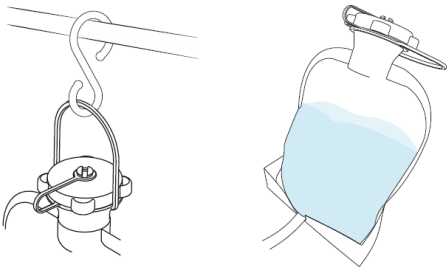

Vattenpåsen kan placeras på golvet i påsstativet eller hängas upp, påsen bör då vara placerad en bit ovanför axelhöjd.


Då behöver du inte pumpa.

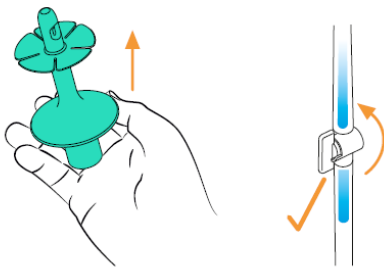

Applicera gelen på konan.

Sitt på toaletten, tryck försiktigt in konan i ändtarmen.


Öppna kranen helt.

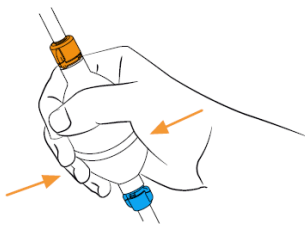

Pumpa in vattnet och övervaka samtidigt volymskalan på vattenpåsen (vanligtvis 300 ml till 500 ml).

Om påsen är hängande, använd självflöde genom att reglera med kranen på slangen.

När du har pumpat klart, ta bort konan från ändtarmen och förbli sittande på toaletten.

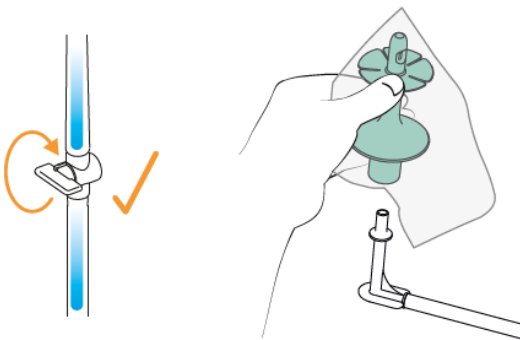

Stäng kranen och ta bort konan från vinkelkopplingen med hjälp av den medföljande avfallspåsen.

Tvätta vattenpåsen, slangar och pump med mild tvål och häng på tork med locket och kranen öppna och pumpen bortkopplad från vattenpåsen.

30 dagars användning för pump, vattenpåse samt slang. Konor är engångsbruk.