

Senast reviderat: 2026-03-31
Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention
Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström (birho25)

Metodkort Thoracoabdominell minimalinvasiv esofagusresektion

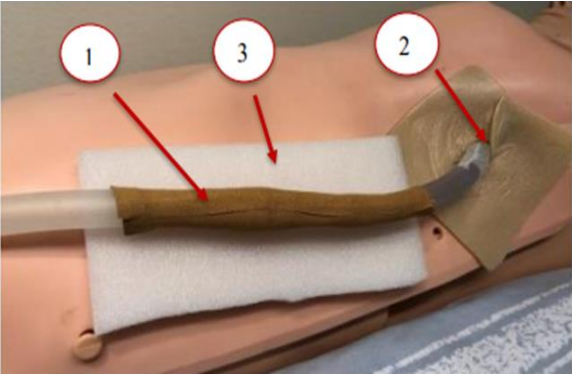
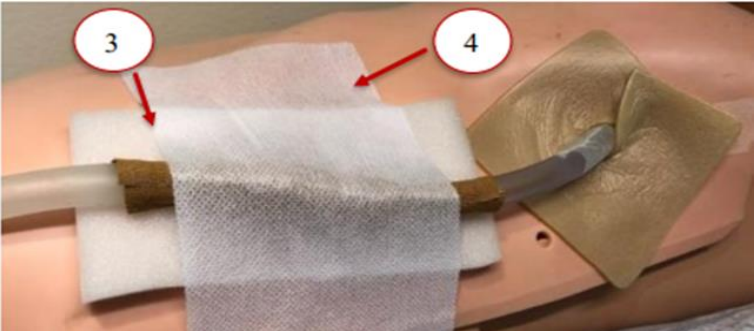
Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	Skall få ny kod
Galler, hakar:	LAP SKOPI GALLER, SKOPI X-TRA GALLER SKOPI-ARM AESCULAP 3D
Op bord och uppläggning: Bilder på uppläggning finns på Sofia under metodkort och i Thoracoabdominell tillbehörskorg.	Op1: Standardbord med kulmadrass och fotplattor. Dubbla benremmar. Sidolägesvagn. Op8: Standardbord med extra motor , kulmadrass och fotplattor. Dubbla benremmar. Sidolägesvagn. MIS-torn på patientens högra sida mot huvudändan Seans 1: Ryggläge med fotplattor Seans 2: Modifierat bukläge- Grå kilkudde, halvmåne hög eller låg, knäskydd gula, lila hård kilkudde, hög gelkudde för ansikte(grön) och lila skumarm. Operatör med vid vändning och upplägg. Patienten vänds på operationsbordet. Vänster arm längs med kroppen.

Extra instrument	Heiss 10 mm Hemoloc L + clips Hemoloc XL + clips , ev Challengertång + clips 5 St Crafford 24 cm På sal: Babcock 15 cm, Clips Ligamax 5mm (EL5ML), Ligaclips ER420 o MIS Glover
Övrigt:	BUKDEL Laparoskopiset Troakar 12 mm, 2B12LT, 1st Ethicon Hylsor 12 mm CB12LT, 3 st Ethicon Insufflatorslang Stryker pneumoclear Freka jejunostomikateter 9 Fr Optikskydd Aesculap Lamphandtag Harmonic HAR1136 1 st Thoraxdrän Ch28 1 st Oasis 1 st K/K Ligasano 2 st Hydrokoll/duoderm 4 st THORAXDEL Bukset Nya lamphandtag Alexis Laparoscopic system (med lock) 2,5-6cm Small C8501 Batteridriven cirkulärstapel, Ethicon (CDH25P, ev CDH29P) Endo GIA Ultra (magasin finns i MIS-vagnen) Ev. Anvil Grasper (engångshållare till städet) 1 st Throaxdrän Ch 28 1 st Oasis 1 st K/K Grön sond med rund topp, 30 Ch Monopolär Diatermi

Övrigt:	KAD Troakar + hylsor, EndoGIA Ultra samt Harmonic sparas till thoraxdelen (även vid ev. konvertering sparas en troakar o hylsa för snitt o gynnsammare vinkel för stapel)
Läkemedel & Vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5mg/ml + 5 µg/ml Plasmalyte 1000ml (till spol) Ev Metylenblått (Methylthionium chloride Proveblue 5 mg/ml)
Suturer:	3-0 Vicryl SH-plus 3-0 V-LOC 90 V20 15 cm VLOCM0604 resorberbar till jejunostomin 3-0 V-LOC 180 V20 15 cm VLOCL0604 resorberbar till anastomoser 4-0 V-LOC V20 15cm VLOCM0603 3-0 Monosof C17 till fixering av jejunostomin 2- 0 Surgipro V20 hållsutur till städet vid bruk av cirkulärstapel
Op.drapering	Laparoskopiset seans 1 och universalset för seans 2 Mepiform över EDA förband på ryggen vid modifierat bukläge. OBS! TVÄTTA UPP MOT AXILLEN VÄ SIDA; kläd högt upp för thoraxdrän som görs vid avslutningen på bukingreppet. OBS! Spara tillräckligt med el-sladd för thoraxdelen.
Speciella önskemål	Alltid konverteringsvagn utanför salen! Vid konvertering hämtas Thoraxgaller och Maxigaller. Övriga instrument finns på metodkort under öppen kirurgi: Gastro; Thoracoabdominellt ingrepp.

Förband:	<p>Förband/Omläggning (önskemål från postop)</p> <ul style="list-style-type: none">● Klipp ett jack till mitten i en Duoderm/Hydrocoll tunn eller tjock 10x10 cm● Fäst Duoderm på huden runt thoraxkatetern. Se bild (2) Förstärk med ytterligare Duoderm om det är läckage eller lägg ett Tegaderm Foam Adhesive över thoraxkatetern.● Koppla på Oasis dränslang. Bolstra med Ligasano 15 x 15 (3). Thoraxkatetern och dränslangen får inte knickas eller ligga direkt mot huden.● Tejpa kopplingen mellan thoraxdränet och dränslangen med 2 st längsgående remsor tyghäfta (1). På bilden är tejpens brun men vi har vit tejp.● Fäst thoraxkatetern och dränslangen längs med patientens sida med Mefix på huden (4). <p>● Om en extra förlängning kopplats mellan patientens thoraxkateter och dränage (Oasis) skall den tas bort innan patienten transporteras till postop. Förlängningen kan bilda ett vattenlås som medför att dränaget inte fungerar optimalt.</p>  
Övrigt:	<ul style="list-style-type: none">● Använd alltid sterilt vatten till vattenlås och manometer.