

Senast reviderat: 2024-04-22

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Metodkort Transplantation – Laparoskopisk leverresektion

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation.

Op kort:	JJB01
Op galler/hakar:	LAP SKOPI GALLER ENDOEYE FLEX 3D OLYMPUS (OBS! MIS 5) alt. ENDOEYE FLEX 3D OLYMPUS MED JUSTERARE (OBS! MIS 7) SONOCA HEPACCS GALLER LAP SKOPI SET
Op bord:	Universal
Extra instrument:	Skopi Kärklämmare (på sal) Heiss 10 mm MicroFrance bipolär tång Ultraljudsprobe 8666 (gamla ultraljudet) alt Ultraljudsprobe 9076 (nya ultraljudet) alt Robotprobe 9096 Ev. Diakrok Ev. Skopi fasciaförslutare
Övrigt:	Troakar 12 mm 2B12LT, 1 st Troakar 5 mm 2B5LT (ev) Hylsa 12 mm CB12LT, 3 st Insufflatorslang Striker pneumoclear 0620050250 Sug och spol 899107 LigaSure Retractable L-hook, LF5637

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:


031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Monopolär diatermi Bruna dukar Ev. Hepaccs combination tubing 70050318-10 (<i>slangset, engångs</i>) Ev. Hepaccs Sonotrodes 617K0030 (<i>laparoskopisk spets, engångs</i>) Ev. Flues 617K0300 (<i>laparoskopiskt skydd svart, engångs</i>) Ev Renssticka (<i>engångs</i>)
Att ha på sal:	Gelpport C8XX2CE LigaClip ER420 LigaMax EL5ML EndoGIA universal 12mm EGIAUSTND + Magasin EGIA60AVM Detachable EndoRetrieval Pouch 899112 (Mölnlyckes preparatpåse)
Läkemedel och vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5 mg/mL Marcain 5 mg/mL Ringeracetat 1000ml (<i>till spol</i>) NaCl 1000ml (<i>till sonoca hepaccs</i>)
Suturer:	3-0 Polysorb V-20 subcutant 2-0 Polysorb V-20 fascian 4-0 Monocryl PS2 sy fast kateter i peritoneum 4-0 SH PDS (ev)
Uppläggning:	MIS-torn och ultraljud på patientens högra sida mot huvudändan
Op drapering:	Lapscopiset Lägg mepiform 10x18cm över de kateterar som sitter i operationsområdet (fastnar inte i förbandet vid avdrapering)
Speciella önskemål:	Alltid konverteringsvagn utanför salen! Ultraljud Sonoca 300. Koppla endast upp sonoca hepaccs om kirurgen önskar detta.

	Vid percutan microablation ska radiologen titta med ultraljud innan man tvättar och draperar patienten. Tfn rtg: 28772 samt dr Joanna Sternal tfn 29028
Biobank:	Prover till biobank. Se separat rutin Hantering av preparat vid levertransplantation och leverresektion Ring biobankslab när proverna är tagna. Telefonnummer finns på preparatdokumentationen.

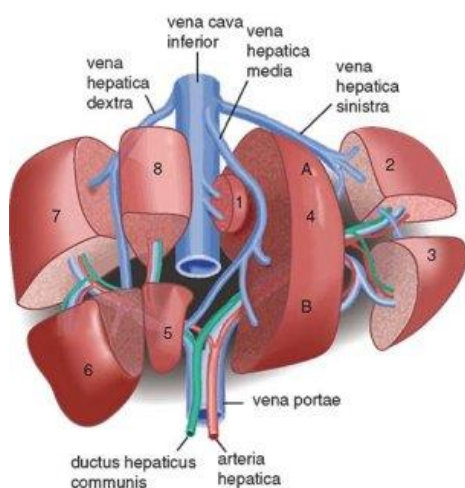

Levern är indelad i åtta anatomiska segment. Varje segment bildar en funktionell enhet med separata arteriella och portala blodkärl samt egen gallgång. De tre levervenerna (hepatica dextra, hepatica sinistra och hepatica communis) delar levern i fyra sektorer sagittalt och dränerar i vena cava. Den centrala delen mellan de båda sektorerna bildar separationen mellan den högra och vänstra leverloben.