

Senast reviderat: 2022-12-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, Operationssjuksköterska (annja28)

Reflect Skolios

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op.kort	NAT19	
Op.galler/hakar:	Rygg (Kamera Olympus 2D), se sista sidan ”Apparater” Optik Storz 30° + ljuskabel Främre Fusion (då behöver du inte ta upp alla x-instrument!), Thoraxgaller(det finns en revbensavbitare på reflectgallren så med lite is i magen kan du vänta med thoraxgallret) Reflect x 5 st galler. Beställs från Globus. Implantat ligger fabrikssterila i väskor Navigering: Grund, Tillägg, mall, Colibri. Kulor	
Extra instrument:		Op 8 Probe Pedikel rak smal F79 (Sax Metzenbaum 18 + 23 cm Pincett DeBakey 25cm Knivskaft nr 3 20cm + knivblad nr10)

	Op 3 Sterilförråd Hake Thachray 35 *30mm, 10cm. EV låna men tag inte upp den.	Peang Crafford 24cm EV Peang Heiss 20cm Doyén djup och grund Skopi retraktor lever (solfjäder) F46 MIS Bipolär tång och sladd Asculap MIS Diaspatel MIS sladd monopolär
--	--	---


Övrigt:	Antifog Slangstrumpa Benvax Knivblad nr 10 Drapering till LILLA dubbelbordet Surgiflo OBS klipp inte av den vita 'spetsen' som vi brukar göra, behöver hela längden! Gula tork MISficka x 2 Gula tork + benvax = Madonna. Används flitigt. Risslerhandtag Thoraxdränage 20ch (8:3) Koppling 3/8- ¼ artnr: 05228 (8:2)
Läkemedel & vätskor:	Morfin special enl PM + tillbehör
Suturer:	PDS 2-0 på nål Hudsutur intracutan Dränagesutur Ev revbessutur Ticron 0 på nål

Uppläggning:

Operatören är alltid med och lägger upp patienten och ritar operationsområdet och genomlyser.

Sal 83 med Pheno: Vanligt interventionsbord, sidoläge, övertrycksmanchett som är uppblåst under patienten. Patienten tejpas fast med Porelasttejp, försök vaddera med mössa eller vadd. Här får du vara observant så du får marginal att tvätta och klä!!

(Sal 85 utan PhenoStandard bord med lång kolfiber tillsats, vanlig madrass+ (T-Huvud platta paddel kan behövas om patienten är lång) + släde med skenor. Släden placeras med långa skendelen långt fram mot huvudet (armbord). De senaste gångerna har vi inte använt T-huvudplattan utan patienten får plats på bordet ändå. Däremot skyddat den undre armen med en vit armskena + polstring.

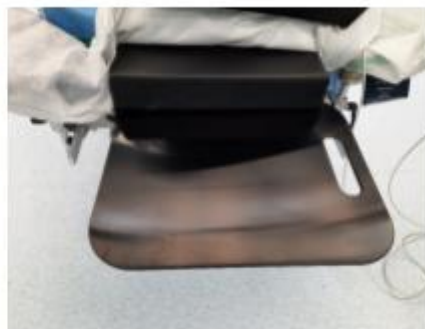

Teleskop-armstöd på vänster sida. Höger arm på Teleskop-armstöd. Lägg patienten längre in-ner på operationsbordet så att armen (vä) kan vila på bordet (eller vid behov använd en kolfiber paddel.)

Lägg **Övertrycksmanschett** under bröstkorgen. Patienten fästs med bruntejp – Porelast tejp som fästes runt höft bröst och arm (försök vaddera med mössa eller vadd). Vaddera armen med vadd till armbågen och bind fast med en linda runt arm stödet. Här får du vara observant så att du får marginal att tvätta och klä!



Apparater:	(C-båge äldre modell). Pheno är att föredra så sal 83 är bäst lämpad Stort dubbelbord pga navigering Mis 2 . (Kirtorn behövs inte alla apparater finns på Mis2.
Op drapering:	Ryggset
Förband:	Foam adhesiv + thoraxdränage förband
Speciella önskemål:	Neurofys Tel 29101 27901. När operationen är klar läggs blockad av narkosläkaren sterilt så låt sterildraperingen vara kvar!!

Lathund hur jag får Optikbilden på Phenons skärm. Här finns ju inga lösa skärmar att titta på...

Gå till Trollyn först. Display, sedan Souce1 sedan LD3. Lämna trollyn

Gå till Bildhantering. Meny, ladda om sidan, hitta mistornets bild, dra bilden till Large display 3 och 4.
klart

