

Senast reviderat 2026-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlnäs (annja28) Op.ssk

## Metodkort

### Endoscopisk spinal stenos – lumbalt -

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

#### Arbetsbeskrivning

<b>Galler</b>	<b>ENDOSKOPISK SPINAL STENOS</b> <b>ENDO SHAVER SPINAL STENOS</b>
<b>Extra instrument</b>	<b>Sterilförråd 8:2</b> Bipolar Electrode kort 280mm 4993691 Slangset till pumpen 4171223 och T0503-01 till den nya endo.stapeln rygg  <b>Vänta med att ta upp detta men tag med allt:</b> Fräsar till Shaver 4 olika sorter.  Vg. Se ”Schematisk översikt endoskopisk ryggkirurgi”  <b>Grå låda E 1:5</b> Rund D 5.5mm Ref 49975 1305 Diamant rund D 5.5mm Ref 49975 1405 Oval D 5.5 Ref 49975 1505  <b>Ljusblå låda E1:5</b> Oval D 5.5mm Ref 49975 1555  <b>Mörkblå låda E 1:4</b> Endo shaver ledad tipp (att sätta fräsen på) Fräs 3,5mm + Nyckel 49975 1704 eller Diamant fräs 3,5mm 49975 1714  <b>Grön låda E 1:4</b>

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**


sahlgrenska.se

	Endo kulelektrod RF Bipo 3,4mm 899364400 engångs. Eller Endo kulelektrod RF Bipo 2,9mm engångs. Sladd till den bipolära diatermin
<b>Övrigt</b>	Ryggset C-amor 5523 x1-2 st. Ioban C-båge skydd x1-2 st. Kameraskydd Imskydd Dr fog Knivblad nr 15
<b>Läkemedel &amp; Vätskor</b>	Na.Cl påse 3 liter x många. Låt ligga i värmeskåpet på salen +2,5 liters sugpåsar x många. Ropivacain 10mg/ml
<b>Uppläggning</b>	Ossanovagga. Standardbord med långkolfibertillsats + huvudplatta, släde till armborden. När patienten är vänd kan benplattorna tas bort eftersom endoskopistapeln skall stå nere vid fotändan på stenoperationerna.  <b>Operatören</b> står oftast på patientens <b>vänstra sida</b> . Det skall stå tydligt i Orbit vilken sida operatören skall stå på, om inte ring och fråga. Se till att det armbordet är så långt upp som det går. Operatören står på ståpall, ställ pedalerna till bipolärdiatermi och shaver på ståpallen. Pedalen till C-bågen kan stå på golvet. Ev kommer c-bågen att flyttas till motsatt sida av patienten under operationen. Då får den kopplas ur och startas om igen. Därför två C- amor drape. Kolla med operatören innan du tar upp bägge! Tag bara upp ett från början
<b>Speciella Önskemål:</b>	C-båge nr 74.  RyggEndoskopitorn, speciell bipolär diatermi + shaver står på stapeln (Wolf). Det vanliga tornet kan tas ut från op. salen.

---

	Inställningar Bipolär: Starta med 40  <b>Genomlyser en hel del, använd röntgenförkläde!</b>
<b>Op.teknik</b>	Lägger snittet centralt.
	Beredskap för konvertering!! Ställ en vagn utanför salen.

Endoskopisk Stenos eller Neurotomi av facettled lumbalt Vä sida

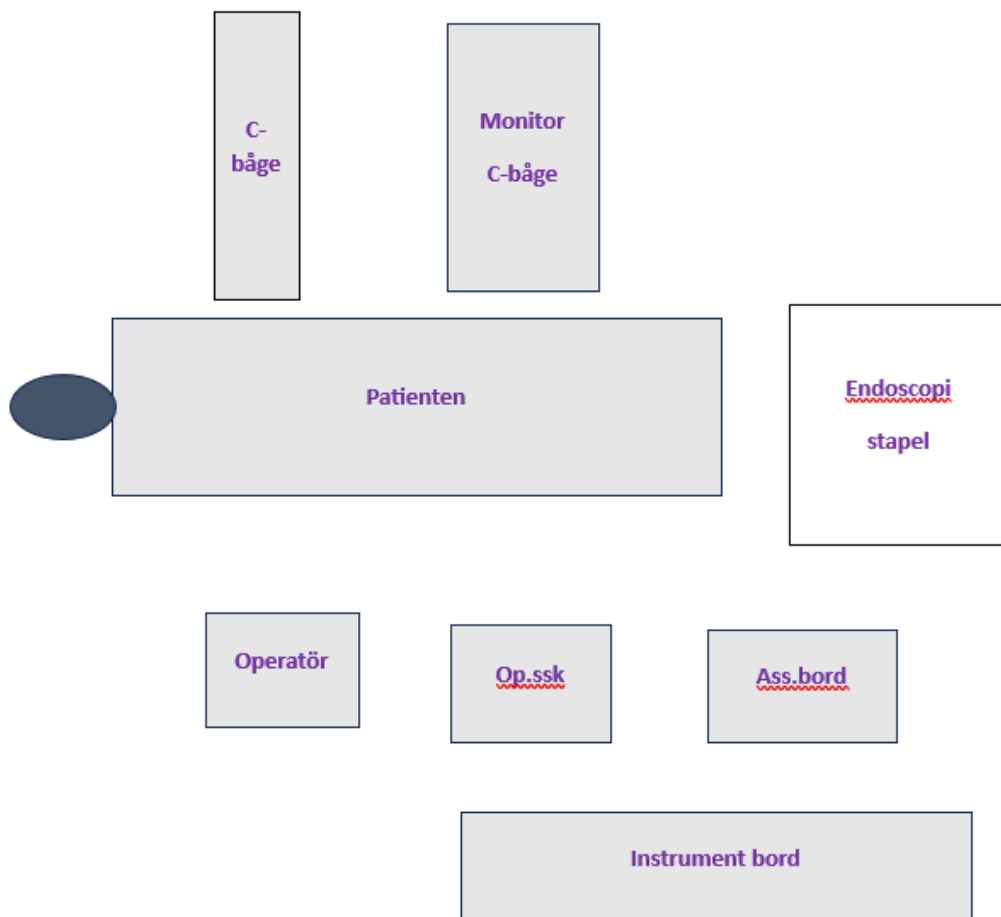

**Vä sida.**





