

Senast reviderat: 2022-02-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson, Operationssjuksköterska (helja13)

Metodkort Akut GI-blödning

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	STORT LAPAROTOMIGALLER KÄRLGALLER Ev DUBBEL OMNITRACT
Op bord:	Lång kolfibertopp
Extra instrument:	Adson djup Adson grund Breda djupa langenbeck
Övrigt:	Skleroseringsnål 6 Shooter Clips Heather probe
Läkemedel & Vätskor:	AdrenalinAPL 10 mikrogram/ml (Kylen i läkemedelsrummet) Aethoxysklerol 10mg/ml (Operations läkemedelslåda i läkemedelsförrådet)
Suturer:	

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Uppläggnings:	Ryggläge Höger arm ut på specialarmbord
Op drapering:	Sterildrapering som till EVAR(se metodkort EVAR)


Placering utrustning:
Starta ARTISpheno



Placera Gast 3 på höger sida av patienten nedanför anestesiarbetsstationen.



Anslut kabel från Gast 3 för bildöverföring i pendel. Kabel passar i alla pendlar.

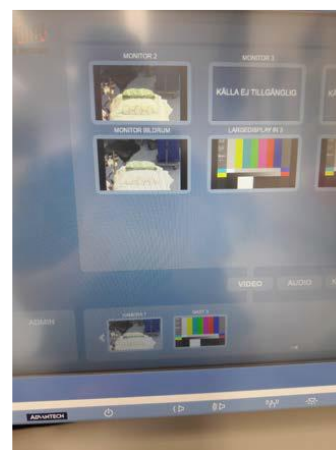

När Gast 3 är kopplad i pendel kommer en ikon Gast 3 upp i bildstyrningspanelen. Aktivera ikonen och välj de monitorer som önskas.

Aktivera önskad layout på trolly *om* skopibild önskas på bildskärmar till ARTISpheno



Tryck. Knappen blir blå.



Olika layout visas på "largedisplay"



Välj layout. Markera ENDO 1.
Tryck OK

- Vid gastroskopi står kirurgen vid huvudända intill ARTISpheno
- Långa anestheslangar.
- Trolley till ARTISpheno står nedanför gastroskopitorn
- Strålskyddsskärmar placeras efter behov. Strålskydds utrustning skall användas av all personal
- Övrig utrustning placering enligt rutin

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se