

Senast reviderat: 2022-02-20


Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson, Operationssjuksköterska (helje13)

Metodkort Carotis shunt

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

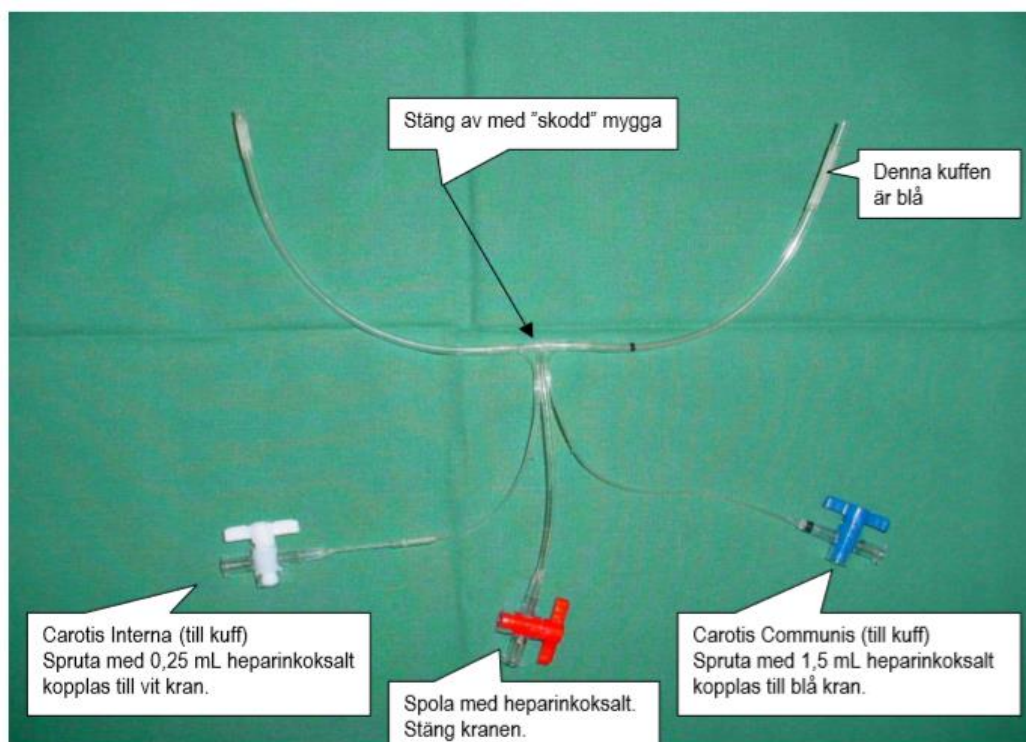

- Testa ballongerna innan användning.
 - Anslut bifogade sprutor till vit och blå kran.
 - Fyll kuff från blå kran med 1,5 mL heparinkoksalt. Kontrollera att kuffen är hel. Aspirera ut all vätska. Låt fylld spruta sitta kvar.
 - Fyll kuff från vit kran med 0,25 mL heparinkoksalt. Kontrollera att kuffen är hel. Aspirera ut all vätska. Låt fylld spruta sitta kvar.
- Spola igenom båda "shuntbenen" med heparinkoksalt via den röda kranen. Stäng kranen.
- Stäng av katetern vid pilen med "skodd" mygga.
- Shunten förs först in i Carotis Communis och sedan i Carotis Interna.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se