

# Patientinformation

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg  
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

**Öppettider mottagning:** måndag-fredag 07:30-16:00

**Bemanning reception:** måndag-fredag 07:30-12:00

**Telefon:** 031-343 81 44


**1177-** Ortopedteknik Göteborg

[www.sahlgrenska.se](http://www.sahlgrenska.se) Sök på ortopedteknik

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om korsetten inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningskyldig.

- *Beräknad livslängd för korsett 3 år*
- *Beräknad livslängd för kardborreband 1 år*

## Korrigerande Korsett

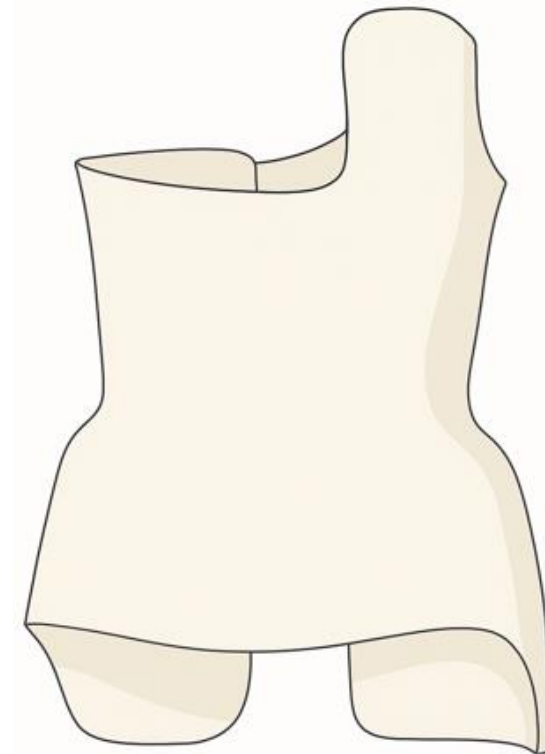

## Syfte

Behandling med korsett syftar till att korrigera ryggens krökar som uppstår när man har skolios. Detta görs genom att korsetten trycker enligt 3-punktsprincipen för att förhindra ökad felställning.

## Användning

- Korsetten ska användas 18-23 h/dygn.
- Bär alltid korsetten väl åtstramad, en löst sittande korsett skaver lätt.
- Använd ett linne eller t-shirt mellan hud och korsett för att minska hudreaktioner

Extra linnen beställs via 1177- Förnyelse av ortopedtekniskt hjälpmedel. Max 5 linnen per beställningstillfälle.

## Begränsningar och varningar

Tryckmärken ska uppkomma där korrigeringar är. Om rodnaden efter en längre tids användning inte försvinner efter korsetten tagits av, eller försvinner för snabbt enligt tabell, kontakta oss för en bedömning. På ljusare hud syns tryckmärken tydligare, det är inte säkert att det syns på mörkare hud.

Rodnad försvinner	Tryck
≥35 min	Eventuellt högt
35-15 min	Bra
<15 min	Eventuellt lågt

Tryckmärken på andra kroppsdelar, tex höftkammen, ska försvinna inom 15 minuter.

Använd inte krämer, lotioner vilket mjukar upp huden och gör den sårbar. Vid annan hudreaktion tex värmeutslag, kontakta ortopedteknik.

Innan kontakt vid misstanke om skav eller tryck, säkerställ först att korsetten används som den ska, är väl åtspänd och att klädesplagget under korsetten inte är veckat, är rent, torrt och är i ett material som kan andas, tex bomull.

## Skötsel och underhåll

Rengöring av såväl korsett som hud är viktigt. Korsetten tvättas med vatten och mild tvål. Säkerställ att tvålrester inte finns kvar och att den är helt torr innan användning. Torka inte med varmluft eftersom plasten då kan mjukna och ändra form.

## Behov av att justera eller reparera ditt hjälpmedel?

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till ortopedteknik på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedel för åtgärd eller för ytterligare bedömning.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar.

Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.