

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-08-28

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2026-08-28

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

MR – Fotled Standard

Us kod/Us namn: M 71000, M71000N

Undersökningstid: 45 minuter
90 min vid undersökning i narkos

Indikation:

Förberedelser: - [Kontrollista inför undersökning med Magnetkamera \(MR\)](#),
och patient-ID kontrolleras inför undersökning.

- MR-säkra kläder.

System: 1,5T eller 3T på SU/DSBS

Patientpositionering: - Hörselskydd och larm knapp tilldelas samtliga patienter.

Patientcentrering: - Mitt på fotleden

Spole: - Fot/fotledsspole alternativt Aircoil/ Flexspole

Kontrastmedel: -

Kontrastinjektion: -

Läkemedel: -

Sekvenser/Kriterier: Standard

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
1	Lokalizern	3 plan	-	Fotled
2	T2 FS FSE	Ax	-	Täck fotleden
3	PD FSE	Ax	-	Täck fotleden
4	T1 FSE	Sag	-	Täck fotleden
5	T2 FS FSE	Sag	-	Täck fotleden
6	PD FS FSE	Cor	-	Täck fotleden

Vid ligamentskada eventuellt utöver standard

	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
7	T2 FSE	Cor/obl	-	Täck talusrulle – tuber calcanei

Vid broskskada eventuellt utöver standard


	Sekvens	Snitt-plan	Snitt-tjocklek	Täckningsområde, vinkling mm. (Kriterier)
8	3D T2 MERGE	Sag	-	Täck fotleden
9	Alt .3D MENSA	Sag	-	Täck fotleden



Sag




Ax

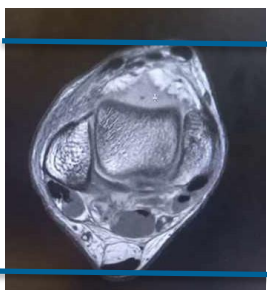

Cor



Cor

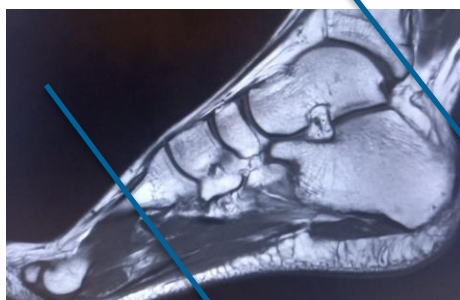

Cor Oblique

Granskare/ arbetsgrupp:

Pär-Arne Svensson specialsjuksköterska Radiologi barn

Jenny Ahlin specialistläkare Radiologi barn

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Izabela Kasperska, (izaka), Specialsjuksköterska

Granskad av: Pär-Arne Svensson, (parsv), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1274

Version: 12.0

Giltig från: 2024-08-28

Giltig till: 2026-08-28